



Tirol Kit (21-0120-023)

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Tiroler Bergrettung.

Ultra- leichtes Patiententransportsystem für die Rettung und Bergung aus kritischen Situationen - insbesondere der Bergrettung. Bei Bedarf ist das System einfachst zusammenzustecken und sofort einsatzbereit.

Die vier verstellbaren und leicht anzubringenden Tragegriffe sind auch als Standfüße für die Korbtrage einsetzbar.

Die Radbefestigungen werden einfach am Rahmen der Korbtrage befestigt und mit dem leicht zu montierendem Rad führen Sie die Korbtrage mit den Tragegriffen sicher durch jedes Gelände.

Das Tirol Kit wird mit der in der Mitte teilbaren Korbtrage 2072 ST (7 kg) mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte geliefert.



Korbtrage 2072 ST (mod.)	
Länge	2.110 mm
Breite	580 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	7 kg
Max. Belastbarkeit	1.134 kg
Material	Titan / Durathene

Tirol Kit	
Gewicht	10,8 kg
Max. Belastbarkeit	225 kg
Material	Aluminium

Ausstattungsmerkmale für das Tirol-Kit:

- Kompaktes leichtes System (nur 10,8 kg)
- 4 verstellbare und abnehmbare Führungsgriffe
- 2 seitlich ansteckbare Radbefestigungen
- Leichtes Speichenrad mit Schnellverschlussstecknarbe
- 2 Schultertragegurte
- Schutz- und Tragetasche, rot, in der geteilten Korbtrage platzierbar
- Korbtrage 2072 ST aus Titan, teilbar, mit leicht abge-schrägtem Beinteil (7 kg)

Optionales Zubehör

- Schutzabdeckung (21-0120-010) zur Anbringung unterhalb der Korbtrage
- Schulter-Tragebegurtung (10-2916-001) zum einfachen Transport der geteilten Korbtrage und des Tirol-Kits auf dem Rücken.
- Abseilspinne

Optionale Schulterbegurtung 10-2916-001

Mit der optional erhältlichen Schulter-Tragebegurtung für das Tirol-Kit, ist das System einfach auf dem Rücken transportierbar.

Die einzelnen Komponenten des Tirol-Kits können in den Hälften der Korbtrage gesichert werden und zusammen mit den ineinandergelegten Hälften der Korbtrage auf dem Rücken transportiert werden.

Optionale Schutzabdeckung 21-0120-010

Die optional erhältliche Schutzabdeckung wird unterhalb der Korbtrage montiert. Diese Schutzabdeckung schützt den Patienten und mit der Schutzabdeckung kann die Korbtrage sicher über den Boden gezogen werden.


Optionale Schultertragebegurtung

Optionale Ferno Abseilspinne 15-0108

Optionale Schutzabdeckung



Die Tragegriffe des Tirol-Kits dienen auch als Standfüße für die Korbtrage. Dies ermöglicht eine rückenschonende Betreuung des Patienten in der Korbtrage.

Korbtrage 2072 ST

Das Tirol-Kit wird mit der Korbtrage 2072 ST geliefert. Die Korbtrage ist aus Titan hergestellt und daher besonders leicht und dennoch extrem stabil. Die Korbtrage ist in der Mitte teilbar. Die beiden Korbtragenhälften können ineinander gelegt und platzsparend untergebracht bzw. transportiert werden.

Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von ca. 2,5 cm. Die gelbe integrierte Rückenauflage bietet Komfort und Stabilität für den Patienten. An der Unterseite der Korbtrage sind Gleitkufen angebracht. Eine Vielzahl von Griffaussparungen ermöglichen eine einfache Handhabung. Zum Lieferumfang gehören 4 Haltegurte mit stabilem Verschluss-System.

- Das Netz aus Durathene® kann bei Temperaturen von -65 ° C bis +93 ° C verwendet werden.
- Die Zugfestigkeit der Gurte beträgt 442 kg.
- Die Zugfestigkeit der Gurtschlösser beträgt 1814 kg.
- Die Schlösser entsprechen den Anforderungen von ANSI Z359.1 und CSA Z259.1

Die Korbtrage ist am Kopf- und Fußteil mit jeweils einer Befestigungsplatte zur sicheren Befestigung der Arretierachsen für die Traggriffe ausgestattet. Zusätzlich ist die Korbtrage mit StratLoad™ Befestigungspunkten ausgestattet. Diese ermöglichen eine einfache Befestigung der als Zubehör erhältlichen Ferno Abseilspinne 15-0108.




Korbtrage 2072 ST



Arretierachse für die Tragegriffe



Befestigungsplatte

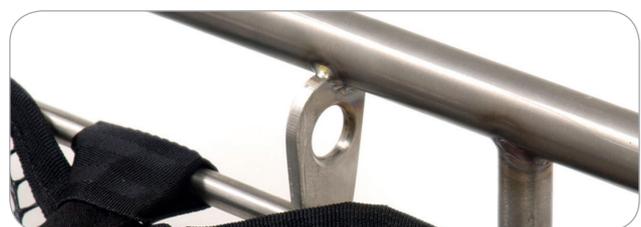

StratLoad™ Befestigungspunkt