




CCT-PX

TRANSPORTWAGEN FÜR DIE INTENSIVPFLEGE

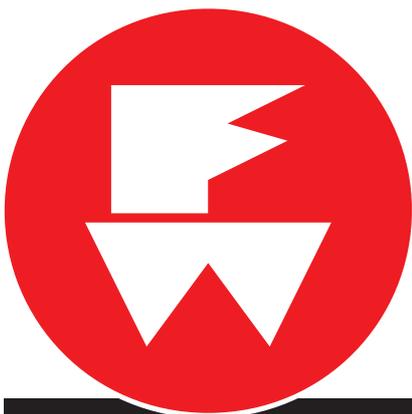

CCT-PX



TECHNISCHE DATEN


Länge (fest)	1 970 mm
Breite (normal)	570 mm
Breite (mit SX Verbreiterung)	920 mm
Höhe (fest)	825 mm
Gewicht	69 kg
Belastbarkeit	250 kg

250 kg

Belastbar bis 250 kg Patientengewicht

CCT-PX

Transportwagen für die Intensivpflege

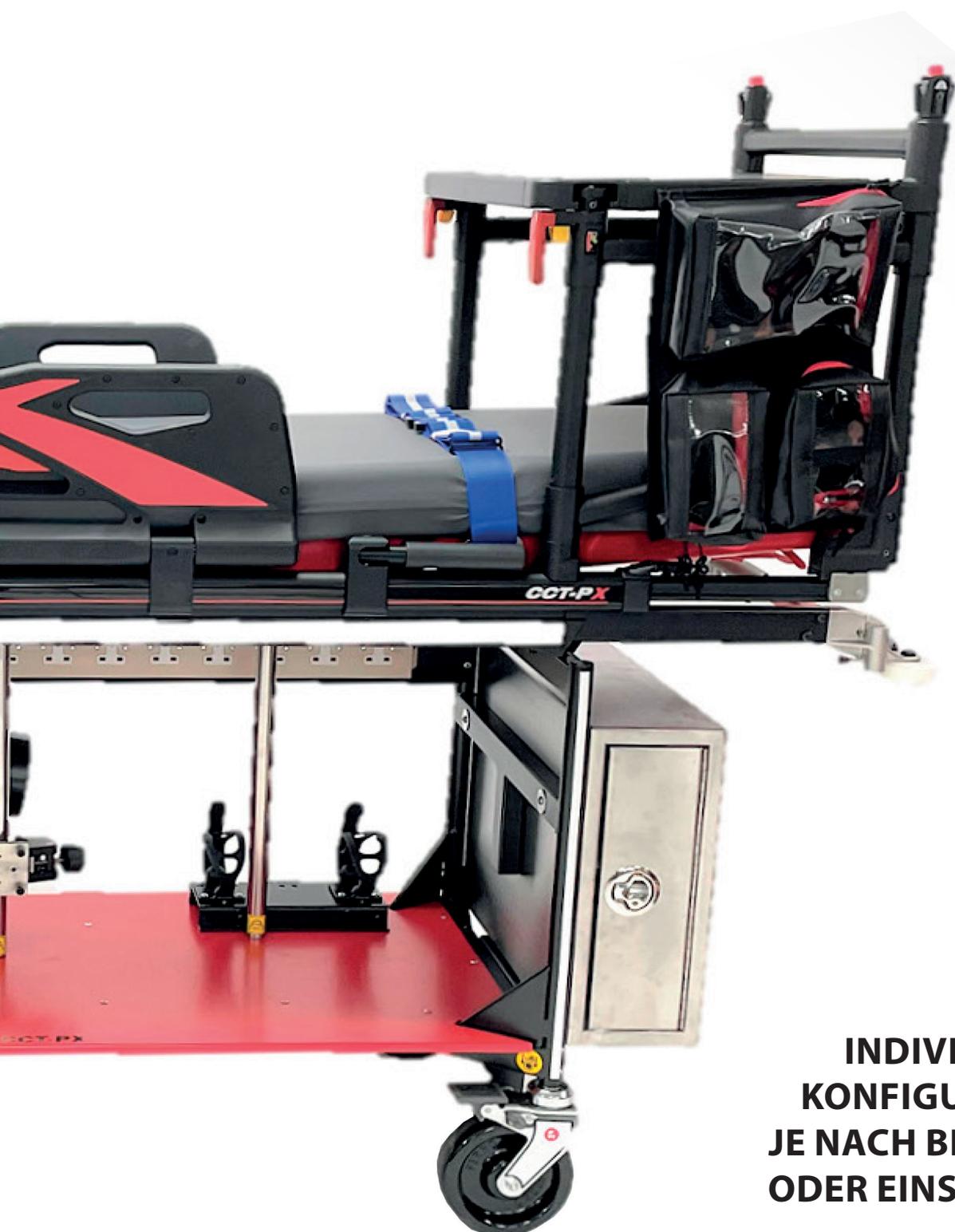

**INDIVIDUELL
KONFIGURIERBAR
JE NACH BEDÜRFNIS
ODER EINSATZGEBIET**



CCT-PX

Der CCT-PX ist FERNOS neuester und verbesserter Transportwagen für die Intensivpflege. Nach individuellen Anforderungen entwickelt und gebaut, ist der CCT-PX an die sich ständig ändernden klinischen Anforderungen konfigurierbar. Dadurch wird sichergestellt, dass alle erforderlichen medizinischen Geräte für jeden individuellen Patiententransport jederzeit sicher am Transportwagen befestigt werden können. Das funktionsreiche Design des maßgeschneiderten CCT-PX kann in Echtzeit entsprechend den unmittelbaren Anforderungen für jeden Transport angepasst werden.

Der CCT-PX hat eine Anzahl an wichtigen Haupteigenschaften und Vorzüge:

Konzipiert nach Spezifikation – Maßgeschneidert nach den Anforderungen jedes Einzelnen, aber mit der Flexibilität, unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen



Individuell Konfigurierbar

Erstklassige Handhabung – Integrierte Wandabweisrollen an allen vier Ecken verhindern unvermeidliches Anstoßen, Kratzer und Dellen - auch im Krankenhausflur.



Wandabweisrollen

Konfigurierbar – die integrierte seitliche Universal Zubehörschiene erlaubt das Befestigen von optionalem Zubehör an der CCT-PX. Dadurch kann die CCT-PX jeder Situation und Anforderung angepasst werden.

Die Universal Zubehörschiene kommt auch bei der **iNjX™** und der **POWERX™** zum Einsatz. Dadurch ist es möglich, Zubehör untereinander auszutauschen.

Integrierte Infektionskontrolle – klare, saubere Kanten, eine abwaschbare und Druck reduzierende antibakterielle Auflagenmatratze, antibakterielle Oberflächenbeschichtung und Biosafe Patiententhaltegurte tragen zu einem hohen Maß an Infektionskontrolle und Sicherheit bei.



Antibakterielle Auflagenmatratze

CEN-geprüfte Sicherheit – dynamisch getestet und zertifiziert nach EN 1789, kompatibel mit Fernos Lock + Load Bodenhalterungssystem.




Lock+Load Bodenhalterung



Universal Zubehörschiene

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Polehalterungen zur Aufnahme medizinischer Geräte
- Universal Zubehörschiene zur Befestigung von optionalem Zubehör
- 12-fach Stromverteiler
- 2 Flaschenhalter Größe E (mit CD-Adapter)
- 2 klappbare Seitenbügel
- Antibakterielle Druck reduzierende Auflagenmatratze
- Abnehmbare verstellbare Flügel-Kopfstütze
- 3fach Verstellung des Fußteiles zur Schocklage und Bauchdeckenentspannung
- Rückenlehne stufenlos verstellbar
- 2 ergonomisch geformte Schiebegriffe (Push-Poles), bei Nichtgebrauch im Tragenrahmen am Fußende unter zu bringen
- 4 hochwertige Laufrollen 150 mm Durchmesser mit Feststellbremsen, davon 1 Rolle antistatisch
- Oberkörperbegurtung und Haltegurte
- Seilwinden-Anschluss
- Monitorhaken an der Rückenlehne

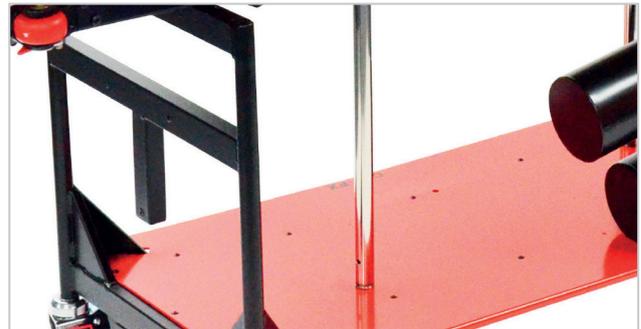

Polehalterung



Push-Poles am Fußende



Flaschenhalter Größe E (mit CD-Adapter)



Klappbare Seitenbügel



Verstellbare Flügel-Kopfstütze



Bauchdeckenentspannung



Monitorhaken



Stromverteiler



Laufrolle mit Feststellbremse

CCT-PX

Optionales Zubehör:

- seitliche Trage- /Führungsgriffe
- Antibakterielle, abwaschbare Begurtung
- Spezieller CD- oder Stickoxid-Flaschenhalter, auf der Grundplatte montiert
- abnehmbarer, 3fach ausziehbarer Infusionsflaschenhalter
- PacRac+ Instrumenten-Platte mit integriertem iNTRAXX System
- 360° Halterung / Polehalterung für PacRac+
- 2 zusätzliche Push-Poles für das Kopfende
- SX Seitenbügel mit Liegeflächenverbreiterung
- SX-EXL Befestigungs-Kit mit aufblasbaren Seitenteilen für die Befestigung der geteilten Schaufeltrage 65 EXL
- Aufbewahrungsschrank
- Lock+Load-Bodenhalterung
- Aufbewahrungsnetz zur Befestigung am Kopfende
- Richtungsfeststeller am Kopfende
- Ballon-Pumpeneinheit
- Halterung für Oxylog 3000 oder Hamilton T1



Bis zu 4 seitliche klappbare Trage- /Führungsgriffe



SX Seitenbügel



Infusionsflaschenhalter und SX Seitenbügel



Spezial-Flaschenhalterung auf Grundplatte montiert



SX-EXL Befestigungs-Kit mit aufblasbaren Seitenpads



Aufbewahrungsnetz am Kopfende


Optionales Zubehör:



PacRac+ mit optionalen Seitentaschen



PacRac+ mit integrierter iNTRAXX Schiene

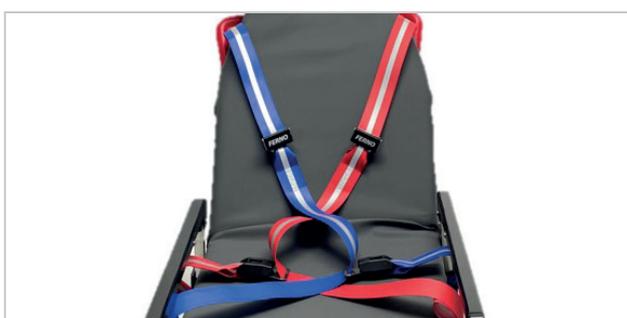

Antibakterielle, abwaschbare Begurtung



Halteung für Oxylog 3000 oder Hamilton T1



Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

