



RESCUE PRODUCTS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 RESCUE PRODUCTS 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

VORFÜHRUNG GEWÜNSCHT?



KORBTRAGE 2069



Der Stahlrahmen der Korbtrage 2069 ist rot pulverbeschichtet. Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von ca. 2 cm. Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt. An der Unterseite sind Gleitkufen angebracht. Zum Lieferumfang gehören drei Haltegurte.

3 verschiedene Modelle lieferbar

2069

Standardbreite
alle Ecken leicht abgeschrägt

2069 CS

Schmale Ausführung,
alle Ecken leicht abgeschrägt

2069 T

Standardbreite,
abgeschrägtes Beinteil

**Für den Transport mit
MULE II geeignet**



TECHNISCHE DATEN

2069 / 2069 T / 2069 CS				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 100 mm	620 mm / (CS) 460 mm	170 mm	15 kg / (CS) 13 kg	400 kg

ACHTUNG: Die Korbtrage 2069 ist nur für den Einsatz am Boden konzipiert und nicht zum Abseilen bestimmt.



STARRE KORBTRAGE 71



Korbtragen haben ihren Einsatzbereich überall dort, wo der Transport von Verletzten mit herkömmlichen Transportmitteln wie Tragstühlen und Krankentragen zum Problem wird, z.B. beim Transport über enge und steile Treppen, durch niedrige Gänge, auf Gerüsten und Baustellen, in der Großindustrie, im Bergbau, auf Schiffen, in Gruben usw.

Die Korbtrage 71 ist in einem Stück aus hochwertigem, schlagfestem und widerstandsfähigem Polyethylen mit einem durchgehenden Alurohrrahmen hergestellt. Somit ist sie korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen. Die seitlichen Wände schützen vor Druck und Stoß. Bei Benutzung als Schleifkorb mildert eine nicht aufsaugende, austauschbare Matratze die unmittelbare Übertragung von Stößen.

Zur Grundausstattung gehören eine verstellbare Fußstütze (je nach Größe des Verletzten), rundum seitliche Griffaussparungen und ein umlaufendes Seil, an dem die vier Haltegurte angebracht werden. Zum Weitertransport kann man sie auf jeder normalen Krankentrage lagern, es ist also kein Umbetten des Verletzten erforderlich. Unsere Schaufeltragen passen ebenfalls hinein.



TECHNISCHE DATEN

Korbtrage 71				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 180 mm	610 mm	190 mm	10 kg	272 kg

TEILBARE KORBTRAGE 71 S



Das Modell 71 S ist in der Mitte teilbar und entspricht in Ausstattung und Ausführung dem Modell 71. Dadurch ist dieses Modell auch bei engsten Platzverhältnissen noch gut zu verstauen.

Die beiden Hälften können ineinander gelegt werden. Die verstellbare Fußstütze, vier Haltegurte und die austauschbare Matratze gehören auch hier zur Grundausrüstung.



TECHNISCHE DATEN

Korbtrage 71 S				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 180 mm	610 mm	190 mm	10 kg	272 kg

RÄDER-KIT 71 W-V für FERNO Korbtragen 71/71 S



Das Räder-Kit für unsere Korbtragen 71 oder 71 S erleichtert den Transport über längere Strecken.

Mit wenigen Handgriffen ist das Kit am Fußteil der Korbtrage mit 4 Schnellverschlüssen befestigt.

Die 250 mm großen Vollgummiräder sorgen für leichten Lauf auch in unebenem Gelände.

Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium.





TECHNISCHE DATEN

Korbtrage 71

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
600 mm	680 mm	320 mm	5,1 kg	280 kg

BERGEN / RETTEN**Zubehör für Korbtragen 71 / 71 S****Vakuummatratze 71 VT**

Schmale Auflage mit rundumgehenden Seil

**Abseilspinne 418-1**


Die 4 großen Karabinerhaken lassen sich auch mit Handschuhen leicht befestigen. Die Gurte sind in der Länge verstellbar.

**Infusionsflaschenhalter 513-4**


Zur Befestigung am Rohrrahmen der Korbtrage, höhenverstellbar, bei Nichtgebrauch abklappbar, geeignet für zwei Flaschen.





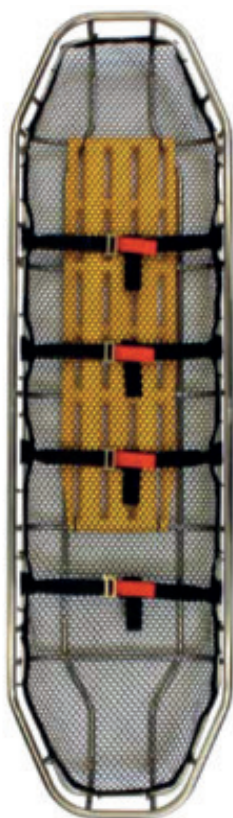

2070 / 2072

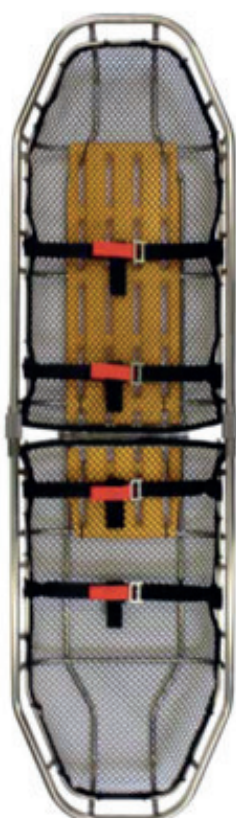

2070 S / 2072 S

Korbtragen Serie 2070

Neben unseren bekannten herkömmlichen Korbtragen zeigen wir hier weitere Modelle mit den verschiedensten Ausstattungsmerkmalen.

Diese Korbtragen bestehen aus einem Stahlrahmen und einer netzartigen Kunststoffbespannung. An der Unterseite sind weitere Streben angebracht, welche zusätzliche Stabilität gewährleisten.

Die Liegefläche ist so geformt, dass sie dem Patienten Schutz, Sicherheit und Komfort während des Bergungsvorganges bietet. Die Korbtragen zeichnen sich besonders durch ihre teils sehr hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht aus.

Für den adipösen Patiententransport empfehlen wir unsere Spezialkorbtrage Modell 2070-32 mit der extrabreiten Liegefläche von 81 cm.

Bei der Modellreihe 2070 besteht der Rahmen aus rostfreiem Stahl. Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von 2,5 cm. Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt. Die gelbe Rückenauflage bietet Komfort und Stabilität für den Patienten. Speziell angebrachte StratLoad™ Befestigungspunkte am Hauptrahmen der Korbtrage dienen zur schnellen Befestigung der Abseilspinne. Zum Lieferumfang gehören vier Patientenhaltergurte.


2070	Standardmodell, leicht abgeschrägten Ecken
2070 T	Zusätzlich abgeschrägtes Beinteil
2070 S	In der Mitte teilbar, leicht abgeschrägte Ecken
2070 ST	In der Mitte teilbar, abgeschrägtes Beinteil




In der Mitte teilbar für eine platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport zum Einsatzort



LocSafe™ Verbindungsstücke für eine sichere Verbindung von teilbaren Korbtragen

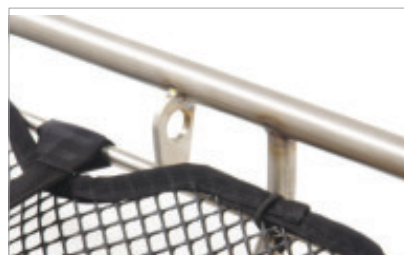

StratLoad™ Befestigungspunkte für eine sichere Anbringung der Abseilspinne

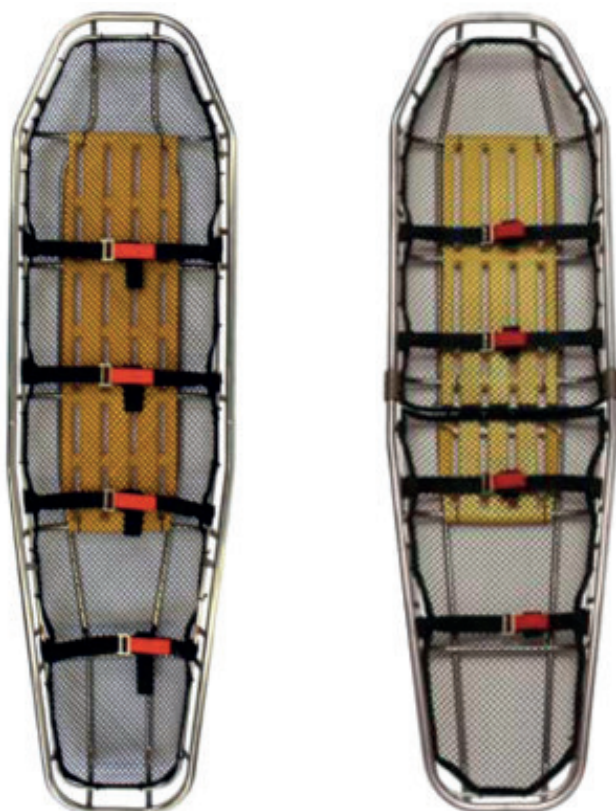

2070 T / 2072 T

2070 ST / 2072 ST

Abseilspinnne 15-0108

Mit vier Karabinerhaken, geeignet für alle Korbtragen der Modellreihen 2070, 2072 und 2079 bzw. Korbtragen mit StratLoad™ Befestigungspunkten. Wir liefern die Abseilspinnne mit fest eingenähten Ösen, in denen die Karabinerhaken befestigt werden.



Korbtragen Serie 2072

Die Korbtragen 2072 entsprechen der Serie 2070, sind jedoch aus Titan hergestellt und daher besonders leicht und dennoch extrem stabil. Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von 2.54 cm. An der Unterseite sind zur Stabilität weitere Streben angebracht. Zum Lieferumfang gehören vier Haltegurte.

2072	Standardbreite, alle Ecken leicht abgeschrägt
2072 T	Standardbreite, abgeschrägtes Beinteil
2072 S	in der Mitte teilbar, alle Ecken leicht abgeschrägt
2072 ST	in der Mitte teilbar, abgeschrägtes Beinteil


TITAN

TECHNISCHE DATEN

2070 / 2072			
	Länge x Breite x Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2070	2 110 x 580 x 180 mm	14 kg	1 134 kg
2070 S	2 110 x 580 x 180 mm	16,3 kg	1 134 kg
2070 T	2 110 x 580 x 180 mm	14 kg	1 134 kg
2070 ST	2 110 x 580 x 180 mm	16,3 kg	1 134 kg
2072	2 110 x 580 x 180 mm	6 kg	1 134 kg
2072 S	2 110 x 580 x 180 mm	7 kg	1 134 kg
2072 T	2 110 x 580 x 180 mm	6 kg	1 134 kg
2072 ST	2 110 x 580 x 180 mm	7 kg	1 134 kg

Korbtrage 2070-32

Die Korbtrage besteht aus einem Stahlrahmen und einer netzartigen Kunststoffbespannung. An der Unterseite sind weitere Streben angebracht, welche zusätzliche Stabilität gewährleisten.


Die Liegefläche ist so geformt, dass die Korbtrage dem Patienten Schutz, Sicherheit und Komfort während des Bergungsvorganges bietet. Die Korbtrage zeichnet sich besonders durch ihre teils sehr hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht aus.

Unsere Spezialkorbtrage Modell 2070-32 mit der extrabreiten Liegefläche von 81 cm speziell für den adipösen Patiententransport.

Der Rahmen der Korbtrage ist aus rostfreiem Stahl. Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von 2,5 cm. Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt. Die Rückenauflage bietet Komfort und Stabilität für den Patienten. Speziell angebrachte StratLoad™ Befestigungspunkte am Hauptrahmen der Korbtrage dienen zur schnellen Befestigung der Abseilspinne. Zum Lieferumfang gehören vier Patientenhaltegurte.



StratLoad™ Befestigungspunkte für eine sichere Anbringung der Abseilspinne

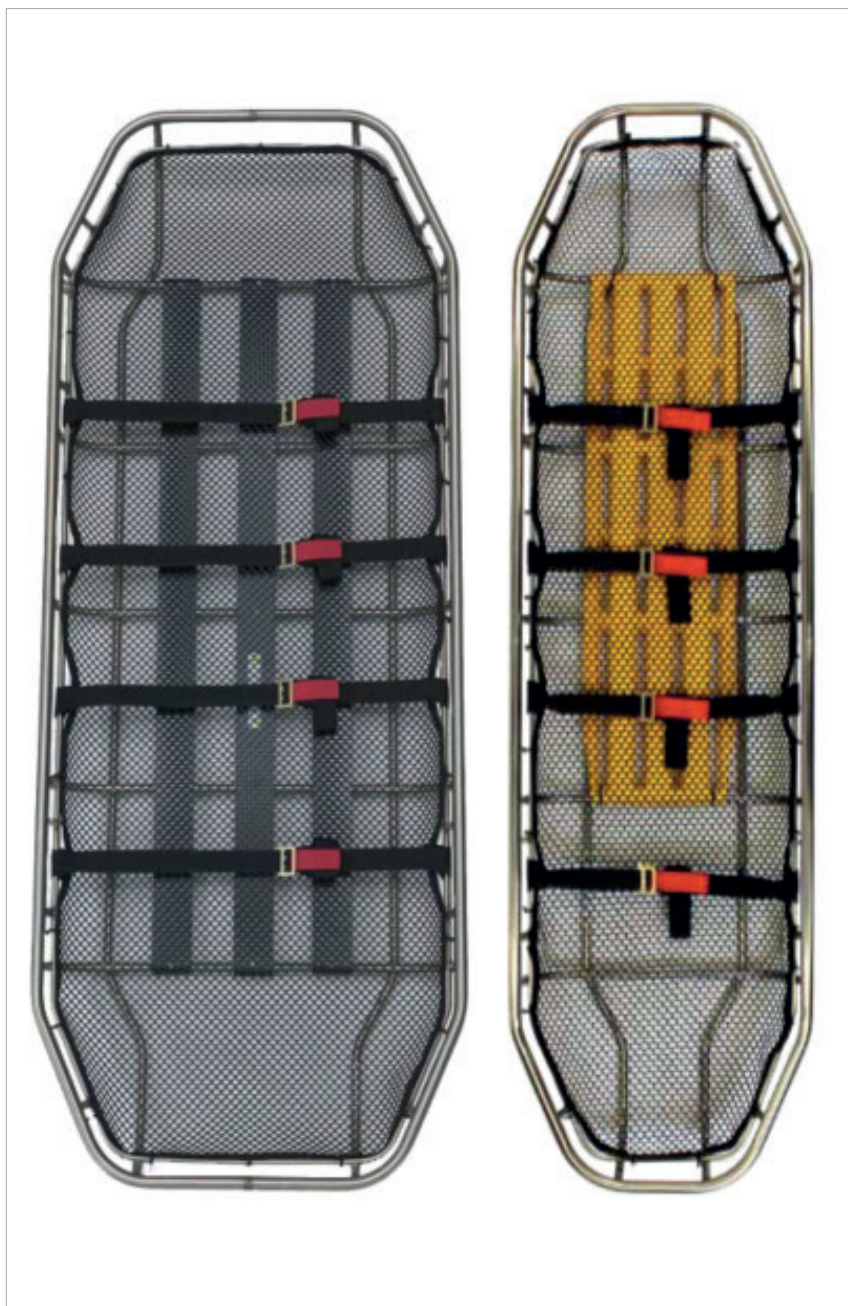

2070-32 Schwerlastmodell, leicht abgeschrägte Ecken, hier im Breitenvergleich mit der Korbtrage 2070

TECHNISCHE DATEN

Korbtrage 2070-32				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 110 mm	813 mm	180 mm	19,2 kg	1 134 kg



Räder-Kit 71 W-V 32 für Schwerlastkorbtrage 2070-32

Das Räder-Kit für unsere Schwerlastkorbtrage 2070-32 erleichtert den Transport über längere Strecken. Mit wenigen Handgriffen ist das Kit am Fußteil der Korbtrage sicher befestigt. Die 4 großen Vollgummiräder sorgen für leichten Lauf auch in unebenem Gelände. Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium.



Räder-Kit 2070 W



Als Räder-Kit 2070 W für die Korbtragen 2070 / 2072 und 2070 S / 2072 S erhältlich.

Fordern Sie weitere Informationen an!

TECHNISCHE DATEN

Räder-Kit 71 W-V 32				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
700 mm	950 mm	480 mm	12 kg	400 kg

Extrabreite Schwerlast-Korbtrage 2070-32 im Einsatz an der Drehleiter

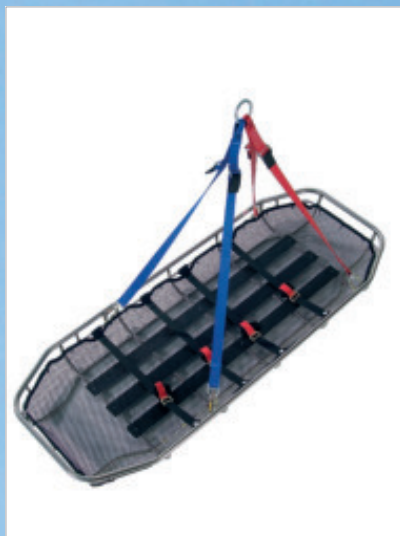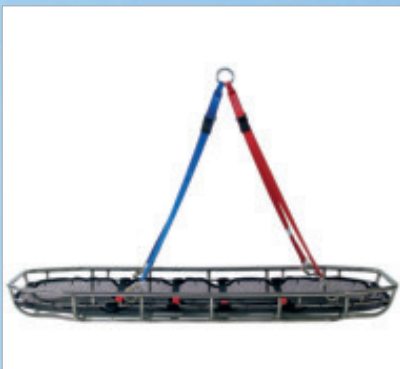


Protection Shield TPS für FERNO Korbtragen Serien 2070 und 2072

Aus der Korbtrage wird eine Schleikorbtrage:

Die äußerst robuste Schleifunterlage für unsere Korbtragen wird am oberen Rahmen befestigt und verhindert Beschädigungen am Unterrahmen beim Schleifen über unebenes Gelände oder scharfe Gegenstände, sowie Schläge und Rucken. Auch die Netzspannung wird geschützt. Bei weichem Untergrund oder Schnee wird das Schleifen erleichtert.

Eigenschaften:

- Schutz gegen unebene oder scharfkantige Oberflächen
- Erleichtern Schleifen der Korbtrage durch die geschmeidige Oberfläche
- einfaches, robustes Design
- große Befestigungshaken (Anbringung mit Schutzhandschuhen möglich)
- zusammenrollbar zur platzsparenden Unterbringung
- passend für die Korbtragen der Serie 2070 und 2072
- auch für **Korbtrage 2070-32** lieferbar

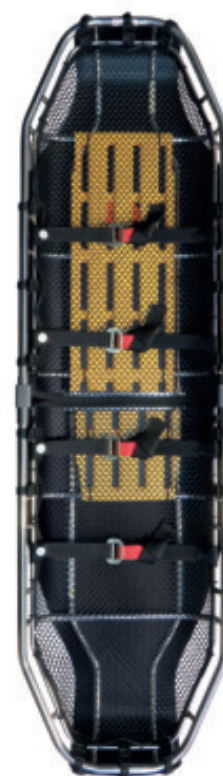

TECHNISCHE DATEN

Protection Shield TPS				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
entsprechend den Korbtragenmodellen der Serie 2070 und 2072			2,8 kg	136 kg

Rohrschutz-Endkappen 11-2006

Diese Schutzkappen werden auf die Rohrenden der teilbaren Korbtragen-Modelle aufgesteckt, um Beschädigungen zu verhindern oder gegen Verunreinigung oder Verstopfungen durch Sand, Steine oder Schutt zu schützen.



BERGEN / RETTEN

Korbtragen Pinnacle Serie 2079

Die Korbtragen 2079 entsprechen der Serie 2072. Sie sind aus Titan hergestellt und daher besonders leicht und dennoch extrem stabil. An der Unterseite sind zur Stabilität weitere Streben angebracht. Zum Lieferumfang gehören vier Haltegurte.

Durch die geringe Breite sind diese Korbtragen auch auf engsten Raumverhältnissen einsetzbar und gut zu handhaben.

2079
2079 S

Schmale Ausführung, Ecken leicht abgeschrägt
In der Mitte teilbar, alle Ecken leicht abgeschrägt

TITAN


LocSafe™ Verbindungsstücke für eine sichere Verbindung von teilbaren Korbtragen



StratLoad™ Befestigungspunkte für eine sichere Anbringung der Abseilspinne



In der Mitte teilbar für eine platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport zum Einsatzort

TECHNISCHE DATEN

2079 / 2079 S					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.	
2 100 mm	485 mm / (S) 495 mm	178 mm / (S) 185 mm	5,5 kg / (S) 6,4 kg	408 kg	

SCHWIMMKRAGEN 11-0124



Schnelle und leichte Hilfe für die Wasserrettung.

Der leichte Schwimmkragen sorgt für leichteres Handling von Patienten im Wasser. Der zweiteilige Kragen ist schnell und einfach zu montieren und in der Korbtrage lagerbar.

TECHNISCHE DATEN

11-0124 Schwimmkragen			
Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1 300 mm	200 mm	100 mm	1,4 kg

Korbtragen Patientengeschirr BRH-BPH

Bei der technischen Rettung kommt es häufig zu vertikalen Hebevorgängen des in der Rettungs- oder Korbtrage gesicherten Patienten.

Trotz der sicheren Begurtung des Patienten, kann es bei diesen Hebevorgängen zu Bewegungen des Patienten in der Rettungs- oder Korbtrage kommen. Diese Bewegungen werden oft als unangenehm empfunden, können Angst auslösen und zu Verletzungen führen.

Das Ferno Korbtragen Patientengeschirr BRH-BPH ist in Verbindung mit der regulären Patientenbegurtung der Rettungs- und Korbtrage einsetzbar. Durch das Korbtragen Patientengeschirr wird der Patient zusätzlich zur vorhandenen Begurtung in der Korbtrage gesichert und die durch die Schwerkraft verursachte Bewegung des Patienten bei vertikalen Hebevorgängen wird verringert.

Dem Patienten wird das oft mulmige Gefühl bei der technischen Rettung genommen und die Gefahr von Verletzungen wird gemindert.

Durch die 2 Schnellverschlusschnallen für die Beingurte, der Schnellverschlusschnalle für den langen Schultergurt und der großen vorderen Befestigungsschleufe zur einfachen Durchfädelung des Schultergurtes ist das Patientengeschirr schnell und einfach angelegt und bietet eine bequeme Passform für den Patienten.

Das Ferno Korbtragen Patientengeschirr BRH-BPH ist ein unverzichtbares Zubehör für technische Rettungseinsätze mit Rettungs- und Korbtragen.



Schnellverschlusschnalle am Schultergurt



MULE II 11-2220 (Tragen-Muli)

MULE II ist ausgestattet mit einem großen Geländereifen, 8-fach verstellbaren Führungsbügeln und leicht bedienbarer Tragen-Halterung, somit leichter zu manövrieren, weniger Kräfteverschleiß und Verletzungsgefahr.

Serienmäßige Ausstattung MULE II:

Universelles Design, passend für die meisten starren Krankentragen. 8-fach verstellbare Führungsbügel. Ein-Rad-Konstruktion, bestens geeignet für enge Wege, leicht manövrierbar, einsetzbar in unwegsamem Gelände, auf sumpfigem Boden, bei Spurrillen, über Wurzeln, felsigen oder auch verschneiten Untergrund. Der große Geländereifen sorgt für bessere Spurtreue und absorbiert Stöße. Somit wird für komfortableren Patiententransport gesorgt.

Befestigung der Krankentrage mittels 2 Gurten mit gummiummantelten Haken und Schnellspannern. Sicherungsstifte beidseitig zur Führungsriff-Arretierung. Zur platzsparenden Unterbringung ist das Gerät schnell demontierbar und zusammengelegt nicht viel größer als das Rad selbst. Auch geeignet für behelfsmäßig zusammengebaute Tragen aus Brettern oder Baumstämmen.

Optional ist das MULE II gegen Aufpreis auch in den Hi-Viz Farben gelb und orange lieferbar.



Mit kräftigen Spanngurten wird die Korbtrage auf dem Mule II gesichert.



TECHNISCHE DATEN

Mule II						
	Länge	Breite	Höhe	zusammengelegt	Gewicht	Belastbarkeit max.
Mule II mit Griffen	2 440 mm	700 mm	470 mm	900 (L) x 700 (B) x 510 (H) mm	24 kg	227 kg
Mule II ohne Griffe	830 mm	650 mm	470 mm		16,5 kg	227 kg

G 2070

Vakuummattatze

Die Vakuummattatze G 2070 dient der Ganzkörperstabilisierung eines Patienten, insbesondere in Kombination mit einer Korbtrage.

Die Vakuummattatze ist besonders leicht und kann einfach transportiert werden. Dies ist von Vorteil bei Rettungseinsätzen in schwierigem Gelände.

Gegenüber anderen Vakuummattatzen, bietet die G 2070 Vakuummattatze eine Stauraumersparnis von 35%.

Die einzigartige Konstruktion bietet eine effiziente Stabilisierung des gesamten Körpers, insbesondere des oberen Rückens, des Nackens und des Halskragens.

Die verstärkte Grundplatte stützt die gesamte Halswirbelsäule.

Zusammen mit den Fixiergurten bietet die Vakuummattatze in Verbindung mit einer Korbtrage die optimale Transportlösung in schwierigem Gelände und bei anspruchsvollen Bergeaktionen.

- Kopf-, Nacken- und Rückenoberteil mit Holzteilverstärkung für eine optimale Immobilisierung
- Effizientes Kammersystem
- Die verstärkte Rückseite der Matratze verringert die Reibung und verbessert das Handling
- Patienten einfacher in die Korbtrage legen oder heraus heben
- 220 kg Belastbarkeit
- 6 Traggriffe
- Einfach zu transportieren, geringes Gewicht, wenig Platzbedarf
- EN 1865 und EN 1789 geprüft
- Röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRI geeignet
- Absaugpumpe enthalten



Die Vakuummattatze G 2070 in der Korbtrage 2070



TECHNISCHE DATEN

G 2070				
Länge	Breite offen/geschlossen	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
1 900 mm	1 390 / 850 mm	350 mm	6,8 kg	220 kg

Trage- und Aufbewahrungstasche 387 für alle FERNO Korbtragen

Die Trage- und Aufbewahrungstasche 387 für FERNO Korbtragen ist in drei Modellvarianten erhältlich.

Modell 387 L für die Schwerlast-Korbtrage 2070-32.

Modell 387 S für geteilte Korbtragen 71 S, 2079 S, 2070 S / ST, 2072 S / ST und 2076.


Model 387 M für alle nichtgeteilten Ferno Korbtrage (ausser 2070-32).

Alle Modelle haben auf der Aussenseite eine aufgenähte Papier-/ Dokumententasche mit Magnetverschluß und auf der Innenseite eine aufgenähte Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Gurten und/oder Abseilspinnen.

Die Modelle 387 M und 387 L haben jeweils 6 große Tragschlaufen und jeweils zwei zusätzliche kürzere Traggriffe. Die großen Tragschlaufen der Trage- und Aufbewahrungstasche dienen auch als Aufhängungsmöglichkeit, z.B. im Fahrzeug. Das Modell 387 S besitzt vier große Tragschlaufen und zwei zusätzliche kürzere Traggriffe.

Zur einfachen Handhabung können die Taschen mit dem Doppelreißverschluss fast komplett geöffnet werden. Zusätzlich sind die Taschen an Aufsetzpunkten verstärkt.

Die Abmessungen der Taschen entsprechen den Korbtragen.

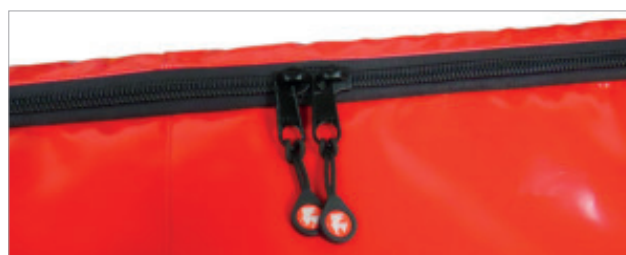

RETTUNGSTRAGE 2074



Die Rettungstrage 2074 eignet sich für waagerechte und senkrechte Evakuierungen. Sie ist leicht und platzsparend zusammenrollbar. Durch das flexible Design wird der Patient sozusagen eingewickelt und fühlt sich sicher und gut behütet. Schultern, Arme und Seiten des Körpers liegen in einer schützenden Hülle während der Rettungsaktion.

Durch ihre Kompaktheit lässt sich die Rettungstrage besonders gut bei engsten Raumverhältnissen einsetzen. Äußerst strapazierfähige Materialien, eine ausreichende Anzahl von Quergurten, gepolsterte Hosenträger- und Fußgurte fixieren den Patienten sicher und komfortabel. Die rundum außen angebrachten Trageschlaufen ermöglichen den Transport durch mehrere Helfer und dienen als Anschlagpunkte für die Abseilspinne. Eine Schutzhülle gehört zum Lieferumfang.

Der Patient kann auch auf der Schaufeltrage gesichert, in der Rettungstrage evakuiert und transportiert werden.



Schutzhülle
gehört zum Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

Rettungstrage 2074			
Länge	Breite	Gewicht	Belastbarkeit max. horizontal (h) / vertikal(v)
2020 mm	840 mm	8 kg	(h) 350 kg / (v) 250 kg

ABSEILSPINNE BRB-VRS

Die FERNO-Abseilspinne BRB-VRS ist in der Länge verstellbar und die Verbindungsnahte sind doppelt verstärkt.

Die Abseilspinne BRB-VRS hat 6 Befestigungsgurte die jeweils in Zweiergruppen farbcodiert sind. Die 6 Karabinerhaken und der Befestigungsring sind fest eingenäht.

Max. Belastbarkeit vertikale Rettung 250 kg
Max. Belastbarkeit horizontale Rettung 315 kg



FERNO®
XTRIC8
RETTUNGSTRAGE



Die FERNO **XTRIC8** Rettungstrage ist eine vielseitig einsetzbare und kostengünstige Lösung für viele Rettungseinsätze an Land, in den Bergen, bei engen Raumverhältnissen oder auch Höhenrettung.


Das XTRIC8 ist ein kompaktes und langlebiges System. Intelligente Funktionen reduzieren den dafür erforderlichen Zeit- und Arbeitsaufwand. Der Patient wird sicher und geschützt verpackt und gleichzeitig sind traditionelle Funktionalität und taktische Evakuierungsmethoden auf einfache Weise mit dem Gerät anwendbar.

Hauptmerkmale

- XTRIC8 wird als komplette, betriebsbereite Einheit mit der gesamten erforderlichen Hardware geliefert.
- XTRIC8 ist für den sofortigen Einsatz -aus der Tasche heraus- vorgerüstet.
- Beinhaltet einen internen Patientengurt für maximale Sicherheit bei vertikalen Hebevorgängen.
- Die farbcodierte 4-Punkt-Hebehilfe ist voreingestellt, um schnellere Implementierung zu ermöglichen.
- Reflektierendes Außengewebe für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Riemen und Schnallen sind handschuhfreundlich und für effizientes Anbringen und Lösen konzipiert.
- Robuste Tragetasche mit reflektierendem Gurtband, vier großen Taschen, verstellbarer Rucksackgurt.
- XTRIC8 ist intuitiv zu bedienen und minimiert die Benutzerschulung.

XTRIC8 Belastbarkeit



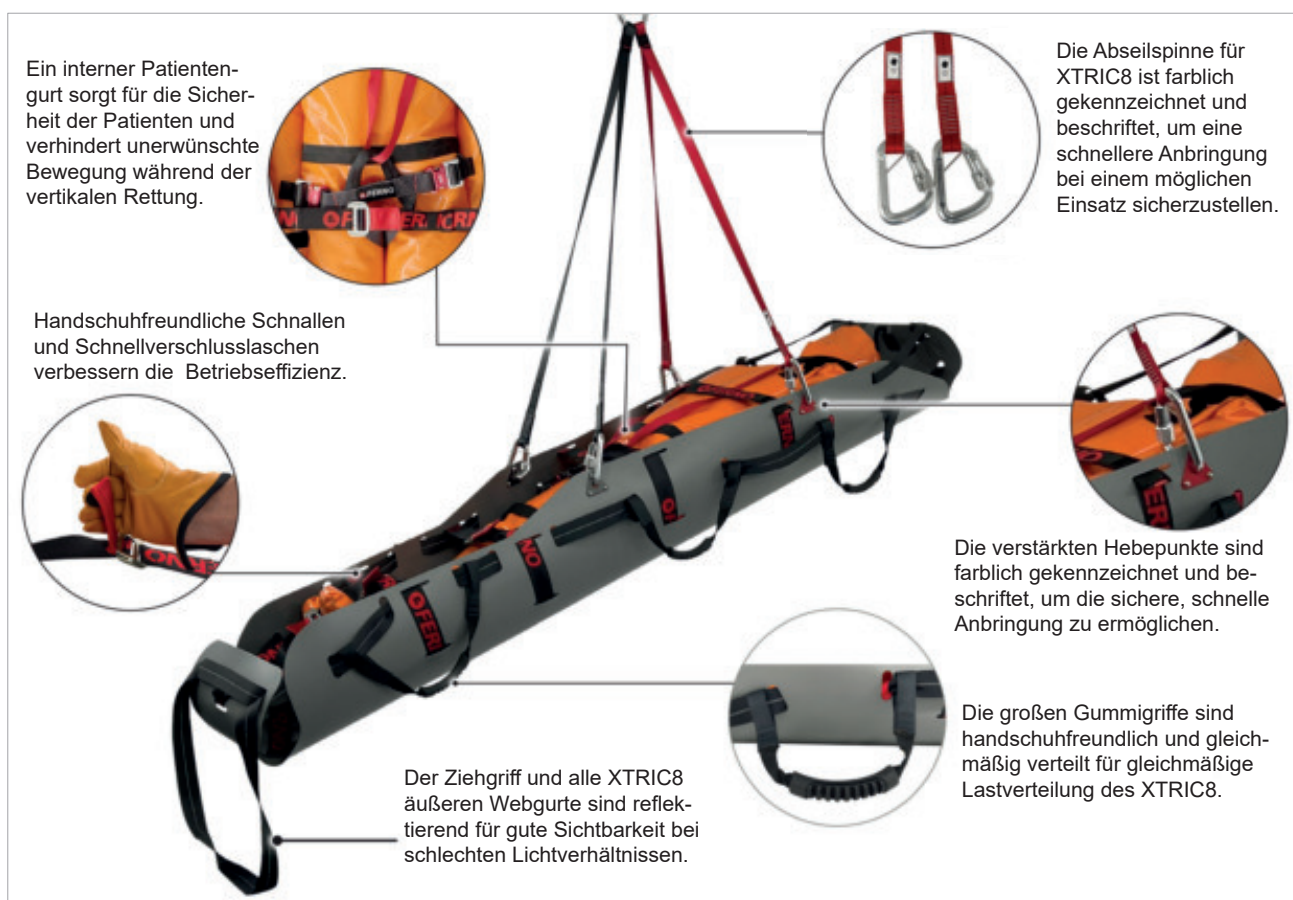

XTRIC8

besteht aus den folgenden Einzelkomponenten:

- XTRIC8-Rettungstrage, vormontiert mit internem Patientengurt, externem Rückhaltesystem,
- Außengurte und Griffe
- 1 x Anschlaggurte zum vertikalen Heben
- 1 x farbcodierte 4-Punkt-Abseilspinne
- 1 x Aufbewahrungstasche mit Rucksackbegurtung



TECHNISCHE DATEN

Rettungstrage XTRIC8			
Länge	Breite	Gewicht	Belastbarkeit max. horizontal (h) / vertikal(v)
2540 mm	max. 914 mm	8 kg	(h) 350 kg / (v) 250 kg

FÜR PROFIS VON PROFIS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 RESCUE PRODUCTS 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



Praktisch: Mit den Trageschlaufen 05-0135 wird der Beugevorgang beim Anheben von **Schaufeltragen, Backboards** und auch **Korbtragen** minimiert. Die Trageschlaufen werden einfach um die Griffaussparungen geschlauft. Mit dem integrierten ergonomischen Griff wird das Anheben und Tragen komfortabel erleichtert.

