

 **FERNO®**

MONDIAL



ROLL-IN TRAGENSYSTEM

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 ROLL-IN TRAGENSYSTEM 20260120
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



**Das MONDIAL
Roll-In Tragensystem mit
Smart-Load Technologie:**

**ergonomisch und
rückenschonend**

Stabiler Fußbügel

Abklappbare Seitenbohle



Radfeststeller





ügel

**Arretierbare
Teleskoptraggriffe**



SMART-LOAD™
Technologie



Verriegelbare Fahrgestellbeine zum
Hochheben der kompletten Einheit

◀ **Zuschaltbare
Schwenkräder**

MONDIAL

Roll-In Tragenssystem mit Komplettausstattung:

Einfachheit in der Bedienung und alle Möglichkeiten um den Patienten zu Versorgen bietet unsere Komplettausstattung.

Eine optimale Ergonomie zum Schutz der Patienten und der Benutzer kann nur erreicht werden, wenn alle Systeme gleichermaßen vollwertig ausgestattet sind.



**Mit der MONDIAL®
können Sie immer sicher sein,
ein vollständig ausgestattetes
Produkt zu haben und für
jede Situation gerüstet zu sein.**

Es sind die Details der umfassenden Ausstattung, die in Ihrer Gesamtheit das MONDIAL® Roll-In Tragensystem zum idealen Werkzeug für Ihre Einsätze macht.

**Die wegweisende
SMART-LOAD™ Technologie,
mit der jedes MONDIAL® Fahrgestell ausgerüstet ist,
ermöglicht das besonders rückschonende Anheben,
sowie Be- und Entladen.**



Vielfache Höhenverstellung in bekannter Form.

Optische und akustische

Wahrnehmbarkeit der Verriegelungen.

Safety-Touch-System,

kein Zusammenbrechen bei versehentlichen betätigen der Griffe für die Höhenverstellung.



SMART-LOAD™-System

mit automatischer Auslösung des Entriegelungsmechanismus der Fahrgestellbeine.

Druck auf die Laderollen entriegelt die Vorderbeine. Patentierter Mechanismus!



Das Patientengewicht ruht beim Einladen (und entsprechend beim Ausladen) vorwiegend auf den hinteren Fahrgestellbeinen und entlastet den Bediener erheblich.

Das **Easy-Lift-System** ermöglicht ein rückschonendes Anheben des Fahrgestells ohne Betätigung der Höhenverstellung.

Anheben auch an den Traggriffen der Krankentrage möglich.

Griffmöglichkeiten zum Einladen

Je nach Körpergröße besteht jetzt die Möglichkeit, das System für den Ein- und Ausladevorgang entweder am Fußbügel, am Fahrgestell-Rahmen oder an den herausgezogenen Traggriffen zu umfassen - eben weil kein Hebel gezogen werden muss.

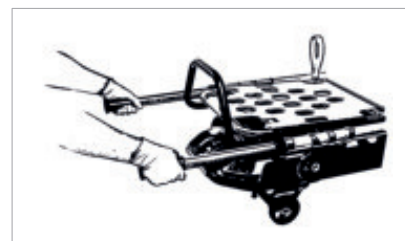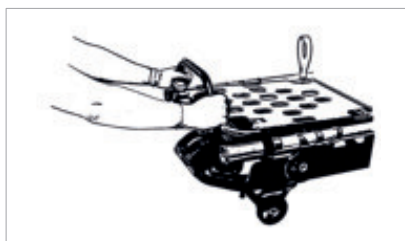

MONDIAL

Fahrgestell M-ST

mit Smart-Load
Technologie
für rückenschonendes Arbeiten!

Das Fahrgestell ST 70 mit dem einzigartigen SMART-LOAD™ System ist das ergonomischste und rückenschonendste Roll-In-System.

Durch das bedienungsfreie Be- /Entladen und Anheben ist ein natürlicher Bewegungsablauf der Benutzer gewährleistet. Keine verkrampfte Haltung, kein unnötiges Konzentrieren auf irgendwelche Hebel.

Belastbarkeit
270 kg

TECHNISCHE DATEN

M-ST							
Länge	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Höhe geklappt	Ladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
1 970 mm	550 mm	1 045 mm	352 mm	343 mm	700 - 790 mm	28 kg	270 kg


Bedienelemente für
Höhenverstellung

Schwenkrollen-
entriegelung


Tracker


Doppelte
Tragenarretierung


Entladesicherung



Hilfsrollen


Zuschaltbare
Schwenkrollen


Einfach ziehen,
einfach schieben,
einfach anheben.
Ganz einfach,
dank Smart-Load™ Technologie.

Dank der Sicherungsfunktionen ist das Einklappen der Beinpaare und das Absenken erst möglich, wenn das Fahrgestell sicher steht und der Benutzer Kraft aufgebaut hat.

Nicht nur **maximaler Komfort**, auch **maximale Sicherheit** steht bei unserer MONDIAL® im Vordergrund.

MONDIAL

Krankentrage RS 2.2 mit Vollausrüstung

Die MONDIAL® Krankentrage bietet zahlreiche sinnvolle Ausstattungsdetails damit sie sich ganz auf die Behandlung und den Transport des Patienten konzentrieren können.

Auch hier wurde auf beste Ergonomie geachtet.

Hohe Stabilität und leichtes Gewicht, um auch in schwierigen Situationen zurechtzukommen, waren uns bei der Entwicklung besonders wichtig.



TECHNISCHE DATEN

MONDIAL® Krankentrage RS 2.2				
Länge	Breite	Höhe max.	Gewicht	Belastbarkeit max.
1 950 mm	550 mm	150 mm	22,9 kg	230 kg


**Hosenträgerbegurtung
und Quergurte**

**Integrierte
Kopfteil-
verlängerung**

**Stufenlos verstellbare
Rückenlehne**

Ablageplatte

**Rundum verschweißte Sektional-
auflage mit integriertem Kissen**

**Zusätzliche
seitliche Traggriffe**

Schocklage

**Bauchdecken-
entspannung**

Belastbarkeit
230 kg

PATIENTENTRANSPORT

Vakuum-Fixierkissen MRP für Krankentragen

Das Vakuum-Fixierkissen stabilisiert und stützt den Kopf des Patienten während des Transports auf der Krankentrage.

Medizinische Untersuchungen beweisen eindeutig die positiven Effekte für den Patienten und die Arbeit des Notarztes oder Rettungsanitäters.

Das Vakuum-Fixierkissen MRP ist zudem im nicht abgesaugten Zustand äußerst komfortabel. Das flexible Kissen ist gefüllt mit einem Mix aus Schaumstoff, Fasern und Granulat Kammern und bietet dem Patienten so hohen Komfort. Es kann schnell abgesaugt werden, sollte es die Situation erfordern, den Patienten zu stabilisieren.

Das Vakuum-Fixierkissen MRP kann zusammen mit Ferno Umbettungs- und Auflagematratzen benutzt werden und passt auf die meisten Krankentragen. Mit zwei Gurten kann das Vakuum-Fixierkissen MRP an den gängigen Krankentragen befestigt werden.

Das Fixierkissen ist röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRT geeignet.

Außenmaterial:

Polyester Faser, PVC beschichtet (schwer entflammbar)

Granulat:

Styropor (schwer entflammbar) Schaumstoff und Polyester Kissenfüllung

Vakuumventil für die Absaugpumpe.



TECHNISCHE DATEN

Vakuum-Fixierkissen MRP			
Breite	Höhe	Dicke	Gewicht
480 mm	480 mm	360 mm	0,7 kg

Normschiene M-NS

Die Normschiene M-NS dient dem Transport von Zubehör am seitlichen Rahmen der Mondial Krankentrage RS 2.2. Die Normschiene wird am rechten oder linken Rahmen der Mondial Krankentrage RS 2.2 befestigt.

Die Normschiene M-NS ist mit einer Belastung von 13 kg nach DIN EN 1789 crash-getestet. Achten Sie aber auf eine ausgeglichene Gewichtsverteilung an der Schiene und an den Seiten der Krankentrage RS 2.2.



Patientenbox-Halterung M 273

zur Befestigung von Zubehör, z. B. der Corpuls C 3 Patientenbox mit Halterung, an der Mondial® Fahrtrage

Die Patientenbox-Halterung M 273 wird am Auflagenblech der Kopfteilverlängerung der Mondial® Fahrtrage montiert und dient der sicheren Befestigung von Zubehör, z. B. der Corpuls C 3 Patientenbox mit der Corpuls Halterung.

Die Patientenbox-Halterung M 273 ist mit einer Belastung von 6.5 kg nach DIN EN 1789 crash-getestet.



Patientenbox-Halterung M 273 montiert am Auflagenblech der Kopfteilverlängerung. Hier mit der Corpuls C 3 Patientenbox.

DIN Stifte Kit

Speziell für die MONDIAL® Krankentrage RS zur Arretierung an DIN / EN genormten Aufnahmen.



PATIENTENTRANSPORT

PacRac™ M 274

Die PacRac™ Geräteplattform wird auf den seitlichen Tragenrahmen aufgesteckt und sorgt für sicheren Halt von Notfallgeräten während des Transportes außerhalb des Fahrzeugs.

Die Geräteplattform ist 4.3 kg leicht, stabil, klappbar und schnell einsatzbereit.



PacRac™ M 274 MONO

speziell für die MONDIAL® MONOBLOC entwickelte Geräteplattform.

- Aufsteckbar
- Zusammenlegbar
- Mit Befestigungsgurten



Infusionsflaschenhalter Mondial

- Dreistufig, auf die passende Höhe einstellbar
- Fest an Fahrgestell oder Trage befestigt
- M 511 A für Mondial® RS zum Anschrauben
- M 511 MB für Mondial® Monobloc zum Anklemmen
- Klettverschluss-Streifen zum Stabilisieren der Infusionsbehälter
- Zum Verstauen herunterklappbar



Kit 0832164 für Entladesicherung

Je nach Tragentisch kann es notwendig sein, zusätzlich das Kit 0832164 zu verbauen. Das ermöglicht eine einwandfreie Funktionalität der Entladesicherung. Für Tragetische von Fremdanbietern muss die Kompatibilität überprüft werden.



Bodenhalterung FL 1



Die Bodenhalterung FL 1 dient der sicheren Fixierung des Ferno MONDIAL® Roll-In Tragensystems im Patientenraum eines Rettungsdienstfahrzeuges und ist ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. Der Halter ist entsprechend der bestehenden Normen konzipiert und vom TÜV Rheinland getestet.

Die Bodenhalterung FL 1 besteht aus:

- Arretiergehäuse - sichert die Trage am Bedienerende (in der Regel Fußende)
- Anschlagblöcke - sichern das System am Einladeende (in der Regel Kopfende)
- Verbindungs- und Führungsgestänge
- Leicht entriegelbarer Arretiermechanismus
- Standard-Befestigungsmaterial



MPG - EN - TÜV

Die MONDIAL® entspricht den geltenden europäischen Normen EN 1789 und EN 1865, was durch den TÜV Rheinland, entsprechend den darin geforderten Tests, geprüft und bestätigt ist.

Wenn Sie wissen möchten, was wir alles intern testen, bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen und von einer unabhängigen Stelle prüfen lassen, dann kontaktieren Sie Ihren FERNO Medizinprodukteberater.

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 ROLL-IN TRAGENSYSTEM 20260120
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

