



SCHAUFELTRAGEN

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 SCHAUFELTRAGEN 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



DAS RICHTIGE WERKZEUG. DARAUF KOMMT ES AN!



65 EXL-B



65 EXL-R



65 EXL



65 EXL-G





SCHAUFELTRAGE 65 EXL-P

**mit PINS zur variablen
Gurtanbringung**



Bei dieser Ausführung werden die Patientenhaltegurte nicht durch die Griffaussparungen geschlauft, sondern mittels an den Haltegurten angebrachten Karabinern eingeklinkt. So können die Haltegurte dem Einsatzzweck entsprechend variabel angebracht werden.

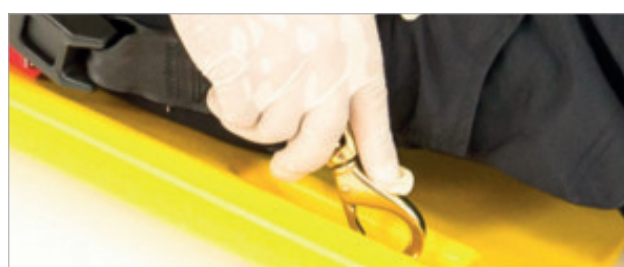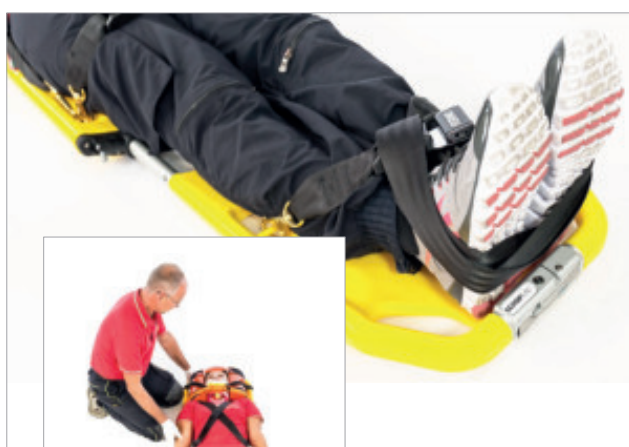

SCHAUFELTRAGEN




Längenverstellung

Die Längenverstellung der Schaufeltrage ist in vier verschiedene Stellungen möglich, sie erfolgt über seitlich angebrachte Drehschnäpper in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse.



Doppelsicherheitsverschluss

Dieser lässt sich leicht und ohne zu verkleben öffnen und schließen. Die beiden Hälften der Trage lassen sich problemlos unter dem Körper des Patienten öffnen und herausziehen.

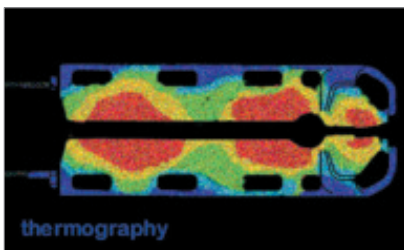

Thermobehandeltes Material wird nicht zu kalt oder zu heiß und schützt den Patienten vor Wärmeverlust



Die Schaufeltrage besteht komplett aus nichtmagnetischem Material und ist somit für die Verwendung mit einem Kernspintomograf geeignet



Röntgenstrahlendurchlässig im gesamten Wirbelsäulenbereich

TECHNISCHE DATEN

65 EXL							
Länge max.	Länge min.	Länge geklappt	Breite	Tiefe offen	Tiefe geklappt	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 007 mm	1 650 mm	1 193 mm	432 mm	70 mm	80 mm	8 kg	227 kg



Die Oberfläche

der Schaufeltrage besteht aus rundum geschlossenem Kunststoff und verhindert somit das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Sie ist leicht zu handhaben, zu reinigen und zu desinfizieren.



Ovales Holmprofil und angewinkelte Griffaussparungen für ergonomische Handhabung

Die SCHAUFELTRAGE 65 EXL entspricht der EN 1865



Die SCHAUFELTRAGE 65 EXL ist nicht magnetisch



In der Mitte klappbar
kann die Schaufeltrage platzsparend verstaut werden.

SCHAUFELTRAGEN**Doppelsicherheitsverschluss**

der beim Schließen und Öffnen nicht klemmt

Muldenförmiger Kopfbereich

zur sachgerechten Immobilisation des Kopfes
und der Halswirbelsäule

Oberfläche

ist leicht zu reinigen und nimmt keine Flüssigkeiten auf

Schwarz, rot, gelb, olivgrün

in verschiedenen Farben lieferbar



FERNO SCHAUFELTRAGEN

65 EXL

Die Schaufeltrage dient zur schonenden Aufnahme und Umlagerung von Patienten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Unnötige Bewegungen des Patienten werden vermieden, denn mit der Schaufeltrage können Sie den Patienten in der Stellung aufnehmen, in der Sie ihn vorfinden. Modell 65 EXL ist äußerst sicher und stabil, von geringem Gewicht, einfach zu reinigen und gut zu bedienen.

Zum Lieferumfang gehören drei Haltegurte mit Druckastenschloss und Aufbewahrungstasche. Der Doppelsicherheitsverschluss lässt sich leicht und ohne zu verklemmen öffnen und schließen. Somit ist die 65 EXL in der Mitte teilbar, damit sie von der Seite unter den Patienten geschoben werden kann, ohne diesen hoch- oder anheben zu müssen.

Die Längenverstellung erfolgt über seitlich angebrachte Drehschnäpper in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse.

Die Schaufeltrage ist platzsparend zusammenlegbar.

**Belastbarkeit**

227 kg

auch mit

Verbreiterungskit-TSL

FASTRAP™ Begurtung 770

- 10-Punkt-System mit 6 Gurten zur Befestigung von Patienten auf Backboards
- Farbkodiert für eine schnelle und sichere Anbringung
- Nylonmaterial mit Klettverschlüssen
- Größe anpassbar
- Passend für die Millennia™ Backboards, NAJO® Backboards, Schaufeltrage 65 und 65 EXL




445 EXL B-Lock Kopffixierset



Das 445 EXL (B-Lock) besteht aus einer Grundplatte mit integriertem QHI Kopfpolster, das für die stabile Lage des Kopfes sorgt, zwei Kopfpolster mit ergonomischen, ovalen Öffnungen für die Ohren sowie einer Stirn- und einer H-förmigen Kopfbegurtung zur Fixierung.

- Erhöhter Komfort durch Soft-Touch Material
- Integriertes V-förmiges QHI Stabilisierungskissen für den Kopf
- Thermoplastisches Material mit antibakterieller Behandlung für schnelle und gründliche Reinigung
- Ovale Öffnungen im Ohrbereich erleichtern die optimale Positionierung der Kopfpolster. Die fixierte Lagerung des Patienten erleichtert die Behandlung.
- Schnelles, einfaches Anlegen der Kopfbegurtung durch Klettverschlüsse.
- Getestet nach DIN EN ISO 10993

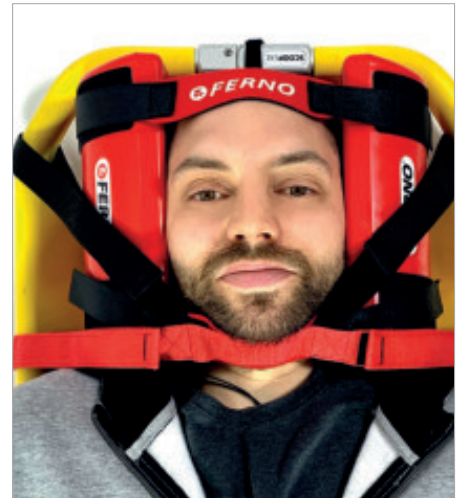

Schutzhülle 385 C und 385-65

Die Tasche ist aus robustem PVC gefertigt, mit 2 Trageschlaufen, Magnetverschluss und zwei Befestigungs- / Aufhängerösen. Passend für unsere Schaufeltragenmodelle 65 und 65 EXL. Zusammengeklappt lässt sich die Schaufeltrage darin praktisch und sauber aufbewahren.



385-65
anthrazit


385-C
rot

Verbreiterung TSL für Schaufeltrage 65 EXL



Die TSL Module einfach zwischen den beiden Verschlusshälften einrasten und die Schaufeltrage 65 EXL wird bei gleichbleibender Belastbarkeit um 100 mm verbreitert.

Als TSL-KIT erfolgt die Lieferung paarweise mit 3 Verlängerungsgurten und Aufbewahrungsbeutel.

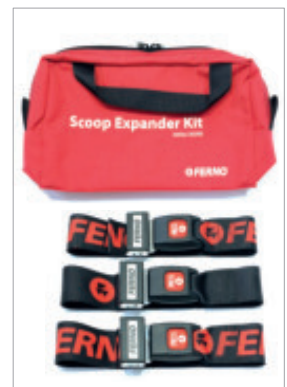

+ 10 cm



Trageschlaufe

Mit den Trageschlaufen wird der Beugevorgang beim anheben von Schaufeltragen, Backboards und auch Korbtragen minimiert. Die Trageschlaufen werden einfach um die Griffaussparungen geschlauft. Mit dem integrierten ergonomischen Griff wird das Anheben und Tragen komfortabel erleichtert.





FERNO

FERNO

SX-EXL

Befestigungs-Kit

Mit dem SX-EXL Befestigungs-Kit für die teilbare Schaufeltrage 65 EXL können die zwei Hälften der geteilten Schaufeltrage an den Seiten der inJX, VIPER oder der PowerX sicher befestigt werden. Dadurch wird eine größere Auflagenoberfläche für den Transport von Patienten ermöglicht.

Zur Verbesserung des Patientenkomforts kann das SX-EXL Befestigungs-Kit auch in Kombination mit optionalen aufblasbaren Seitenpads verwendet werden.



Maximale Belastbarkeit: Durch die Belastbarkeit von mindestens 100 kg pro Seite und der Verteilung des zu transportierenden Gewichts auf eine größere Auflagenfläche, bleibt die maximale Belastbarkeit der Fahrtragen erhalten.



SCHAUFELTRAGE 65

Das Modell 65 ist aus stabilem Aluminium hergestellt und hat eine maximale Belastbarkeit von 159 kg. Die Schaufeltrage ist klappbar und längenverstellbar. Sie kann zur Unterbringung platzsparend zusammengelegt werden. Das schmale Fußende ist vorteilhaft bei engen Raumverhältnissen. Die Schaufeltrage passt in die FERNO Korbtrage.

Drei Haltegurte mit Drucktastenschloss im Aufbewahrungsbeutel gehören zum Lieferumfang.



Klappbar zur platzsparenden Unterbringung



Wandhalterung 2259

Zweiteilige Wandhalterung zur sicheren Fixierung der geklappten Schaufeltrage 65.



TECHNISCHE DATEN

Schaufeltrage 65							
Länge max.	Länge min.	Länge geklappt	Breite	Tiefe offen	Tiefe geklappt	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 005 mm	1 650 mm	1 193 mm	425 mm	70 mm	90 mm	7,5 kg	159 kg

Wandhalterung 561 / 561 V

Zweiteilige Wandhalterung zur Fixierung der Schaufeltragen 65 oder 65 EXL.

- 561 Zur horizontalen Fixierung der Schaufeltrage
- 561 V Zur vertikalen Fixierung der Schaufeltrage



**Die Wandhalterung 561 V
für die
Schaufeltrage 65 EXL
ist getestet entsprechend
EN 1789.**



65 EXL-B



65 EXL-R



65 EXL-G



65 EXL

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de




Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 SCHAUFELTRAGEN 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

Schnelle
Extrikation
in weniger als 20 Sekunden

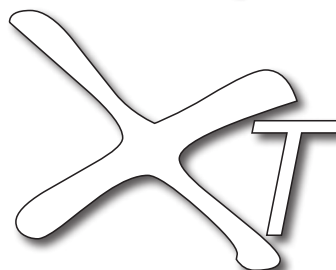

Board



Fordern Sie weitere
Informationen an!

