



TACTICAL PRODUCTS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 TACTICAL PRODUCTS 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



A full-page photograph showing a military rescue operation in a desert environment. In the foreground, a soldier is lying on a stretcher, being moved by other soldiers. One soldier in the background is holding a rifle. The scene is dusty and appears to be a training exercise or a real-life rescue mission.

**FÜR DIE BESONDEREN
EINSÄTZE:**

**PROFESSIONELLE PRODUKTE
FÜR
RETTUNGS- UND
BERGUNGSEINSÄTZE**

BACKBOARD

NAJO® Lite BackBoard

Das FERNO Najo® Backboard ist aus stabilem Polyethylen hergestellt, daher von geringem Gewicht aber dennoch hoch belastbar. Es ist ideal zur Rettung und stabilen Lagerung von Verletzten an Land oder im Wasser geeignet.

- Kompaktes Design für leichte Handhabung und platzsparende Unterbringung
- Stabile rutschfeste Unterlage für den Patienten
- 22 Griffaussparungen
- Abgerundete Ecken
- Oberfläche widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, Chemikalien und extremen Temperaturschwankungen
- 100% wasserundurchlässig
- Integrierte Befestigungsmöglichkeiten für Haltegurte und Kopffixierung
- Schwimmfähig
- Einfach zu dekontaminieren
- An Land bis 204 kg belastbar



Das NAJO® Lite Backboard ist mit einem Schlitz im Beinbereich ausgestattet. Somit können die Beine des Patienten separat gesichert werden.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
NAJO® Lite Backboard	1.829 mm	406 mm	45 mm	6,6 kg	204 kg

* Aufgrund des Herstellungsprozesses kann die Länge bis zu +/- 38 mm abweichen.

Fastrap™ Begurtung

770

- 10-Punkt-System mit 6 Gurten zur Befestigung von Patienten auf Backboards
- Für eine schnelle und sichere Anbringung
- Nylonmaterial mit Klettverschlüssen
- Größe anpassbar
- Passend für die Millennia™ Backboards, NAJO® Backboards, Schaufeltrage 65 und 65 EXL



KED 125

Rettungskorsett

Das KED Rettungskorsett ist eine zeitsparende und lebensrettende Methode zur Ruhigstellung und Bergung von Verletzten bei Autounfällen oder aus engen, schwer zugänglichen Lagen, vor allem wenn das Vorliegen einer Wirbelsäulenverletzung anzunehmen ist.

Farblich unterschiedliche Gurte machen das Anlegen einfach. Das KED ist auch bei Beckenfrakturen zur Ruhigstellung verwendbar. Nach Lösen von zwei Brustgurten ist die Defibrillation unter Aufrechterhaltung der Ruhigstellung des Verletzten möglich.



TECHNISCHE DATEN

	Länge geöffnet	Länge gerollt	Breite geöffnet	Breite gerollt	Dicke geöffnet	Dicke gerollt	Gewicht	Belastbarkeit max.
KED 125	820 mm	890 mm	800 mm	280 mm	30 mm	152 mm	3,5 kg	227 kg

Tragetuch Manta 132

Ausstattungsmerkmale:

- zusammengefaltet einfach aufzubewahren
- einsetzbar für die Umlagerung von adipösen Patienten, Evakuierung oder Zudecken von Patienten
- ideal für den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen
- Taschen an beiden Enden halten Backboard, Füße und Hände des Patienten
- max. Belastbarkeit: 363 kg
- Abmessungen: 1.160 x 1.980 mm
- lieferbar in weinrot, orange oder olivgrün



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Länge	Breite	Höhe	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Manta 132	1.980 mm		1.160 mm			2 kg	363 kg

FERNO SCHAUFELTRAGEN

65 EXL

Die Schaufeltrage dient zur schonenden Aufnahme und Umlagerung von Patienten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Unnötige Bewegungen des Patienten werden vermieden,

denn mit der Schaufeltrage können Sie den Patienten in der Stellung aufnehmen, in der Sie ihn vorfinden. Modell 65 EXL ist äußerst sicher und stabil, von geringem Gewicht, einfach zu reinigen und gut zu bedienen.

Zum Lieferumfang gehören drei Haltegurte mit Druckastenschloss und Aufbewahrungstasche. Der Doppelsicherheitsverschluss lässt sich leicht und ohne zu verklemmen öffnen und schließen. Durch diesen Doppelsicherheitsverschluss ist die 65 EXL in der Mitte teilbar, damit sie von der Seite unter den Patienten geschoben werden kann, ohne diesen hoch- oder anheben zu müssen.

Die Längenverstellung erfolgt über seitlich angebrachte Drehschnäpper in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse.

Die Schaufeltrage ist platzsparend zusammenlegbar.



Die SCHAUFELTRAGE 65 EXL ist nicht magnetisch



Bei der Ausführung 65 EXL-P werden die Patientenhaltegurte nicht durch die Griffaussparungen geschlauft, sondern mittels an den Haltegurten angebrachten Karabinern eingeklinkt. So können die Haltegurte dem Einsatzzweck entsprechend variabel angebracht werden.





Die SCHAUFELTRAGE 65 EXL entspricht der EN 1865



Doppelsicherheitsverschluss

Dieser lässt sich leicht und ohne zu verklemmen öffnen und schließen. Die beiden Hälften der Trage lassen sich problemlos unter dem Körper des Patienten öffnen und herausziehen.



Die Oberfläche

der Schaufeltrage besteht aus rundum geschlossenem Kunststoff und verhindert somit das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Sie ist leicht zu handhaben, zu reinigen und zu desinfizieren.

Belastbarkeit


227 kg

auch mit
Verbreiterungskit-TSL



Längenverstellung

Die Längenverstellung der Schaufeltrage ist in vier verschiedene Stellungen möglich, sie erfolgt über seitlich angebrachte Drehschnäpper in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse.

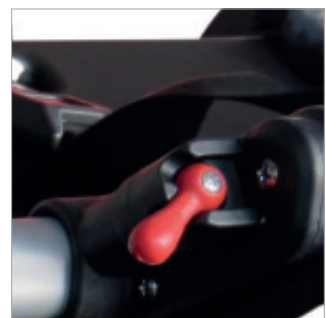


**In der Mitte klappbar
kann die Schaufeltrage
platzsparend verstaut
werden.**

Verbreiterung TSL für Schaufeltrage 65 EXL



Die TSL Module einfach zwischen den beiden Verschlusshälften einrasten und die Schaufeltrage 65 EXL wird bei gleichbleibender Belastbarkeit um 100 mm verbreitert.

Als TSL-KIT erfolgt die Lieferung paarweise mit 3 Verlängerungsgurten und Aufbewahrungsbeutel.

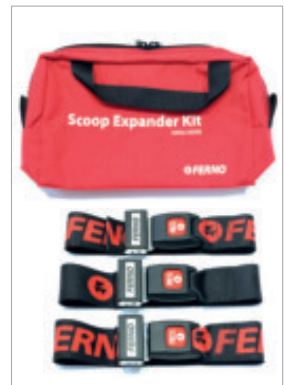

+ 10 cm



Trageschlaufe

Mit den Trageschlaufen wird der Beugevorgang beim anheben von Schaufeltragen, Backboards und auch Korbtragen minimiert. Die Trageschlaufen werden einfach um die Griffaussparungen geschlauft. Mit dem integrierten ergonomischen Griff wird das Anheben und Tragen komfortabel erleichtert.







XT
Board

XT Board

Das XT Board aus Composite-Material ist äußerst leicht und dennoch stabil. In weniger als einer halben Minute angelegt stellt es bisherige Hilfsmittel in den Schatten und ist so hervorragend geeignet für die Stabilisierung der Wirbelsäule und anschließende Bergung von verletzten Personen aus engen Räumlichkeiten, z.B. aus Fahrzeugen.

Das XT-Stabilisierungs-Board dient der schnellen Extrikation und Ruhigstellung der Wirbelsäule bei der Rettung aus engen Räumlichkeiten und kritischen Situationen. Es ist für ein breites Spektrum von Patienten und Anwendungen einsetzbar, z.B. Kinder, adipöse Patienten oder auch schwangere Frauen.

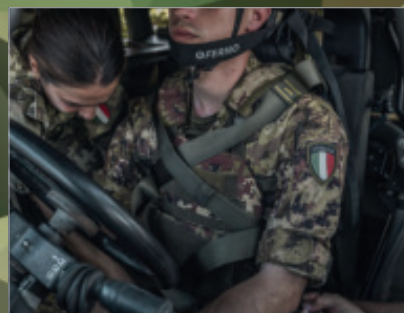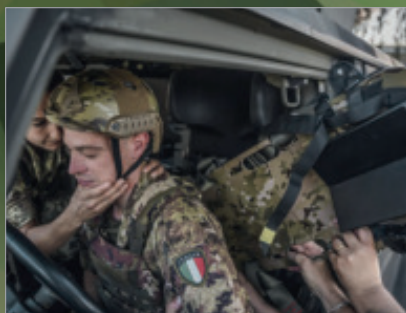

0 Sek.

XT zur Immobilisierung der Wirbelsäule hinter den Patienten schieben

5 Sek.

Kopfgurt anlegen

10 Sek.

Patienten mit den farblich codierten Gurten sichern

15 Sek.

Patienten aus dem Fahrzeug heben



18 Sek.

Patienten vom Unfallort abtransportieren

- Schnelle Extrikation in weniger als 20 Sekunden
- Vier farblich codierte Gurtschlösser, Kopffixierung und glatte Oberfläche sorgen für korrektes Anlegen
- Leichtes Fassen und Heben durch 4 Trageschlaufen
- 100% röntgenstrahlendurchlässig
- Leicht zu reinigen und desinfizieren

Lieferumfang: XT Board, QHI Kopffixierung mit Stirn- und Kinngurt, Aufbewahrungstasche



Kopffixierung QHI

Das QHI aus Polyurethan ist leicht zu reinigen. Mit den geringen Abmessungen 220x180x60 mm ist das QHI platzsparend unterzubringen, es wiegt nur 370 g.

Das ergonomische Design in V-Form sorgt in Verbindung mit der zum Lieferumfang gehörenden Kopfbegurtung für sichere Stabilisierung beim Transport des Verletzten.

Auf Wunsch liefern wir als Zubehör einen weiteren Stirn- oder Kinngurt.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe XT Board mit QHI	Gewicht	Belastbarkeit max.
XT Board	830 mm	300 mm	60 mm	2 kg	160 kg

Universal-Kopffixier-Set

445



Die Kopffixierung ist einfach in der Anwendung, leicht, gut zu reinigen, passend für unsere Backboards Millennia™ und NAJO®, sowie den Roll-In-Tragensystemen MONDI-AL® und X2+.

Die Kopffixierung ist röntgenstrahlendurchlässig und CT-geeignet. Zwei kunststoffbeschichtete Schaumgummikeile mit Ohraussparungen, eine Grundplatte und zwei Kopfbänder gehören zum Lieferumfang.

- Einfach anzulegen
- Anpassbar
- Schwer entflammbar
- Leicht zu reinigen
- Desinfizierbar
- Röntgenstrahlendurchlässig und CT-geeignet
- Flüssigkeitsabweisende Oberflächen



TECHNISCHE DATEN

	Höhe	Breite	Länge	Gewicht
Kopffixier-Set 445	432 mm	254 mm	381 mm	0,878 kg

Tri-Fold Backboard MANTIS

Das Tri-Fold Backboard ist einfach in der Konstruktion, aber dennoch sehr stabil und haltbar. Es eignet sich hervorragend zur Unfallrettung, ist kompakt zusammenlegbar und somit platzsparend unterzubringen. Mit wenigen Handgriffen in Sekunden einsatzbereit.

Hergestellt aus Aluminium ist das Tri-Fold Backboard leicht und widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen. Kein Brechen, kein Absplittern unter hoher Belastung.

Das Tri-Fold Backboard ist mit großen Griffaussparungen und Gurtöffnungen ausgestattet.

Vorteile:

- In Sekunden einsatzbereit
- Bis 227 kg belastbar

Zubehör: Rucksack

Lieferbarkeit unter Vorbehalt.



Ferno Tactical Litter 108 T

Besonders robuste, klappbare Trage mit Gewebeauflage für den taktischen und Katastrophenschutz Einsatz.

- Griffe mit rutschsicherer Oberflächengestaltung in den Trageholmen integriert
- Leichte, aber besonders starke Aluminiumkonstruktion
- Inklusive 2 Befestigungsgurten aus Polypropylen
- Einfach zu Desinfizieren
- Entspricht der Norm US military Spec MIL-L-49511B



Leichte Aluminiumkonstruktion mit nur 8 kg Eigengewicht und 159 kg Belastbarkeit. Der Tragenbezug aus langlebigen Polypropylengewebe ist rutschsicher, schimmelresistent und widerstandsfähig gegen Flammen und chemische Flüssigkeiten.

TECHNISCHE DATEN

	Länge ausgeklappt / geklappt	Breite min. / max.	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Tri-Fold	1814 / 630 mm	406 mm	50 mm	5,5 kg	227 kg
Tactical Litter 108 T	2336 / 1143 mm	203 / 584 mm	150 mm	8 kg	159 kg

Military Splints AS 190 MS MOD

VAKUUMSCHIENEN



Transporttasche AS 180 MS



AS 120 MS



AS 100 MS



AS 140 MS

Die Vakuumschienen sind aus vinylbeschichtetem Nylon hergestellt und mit Polystyrol-Granulat gefüllt. Sie dienen ideal zur Ruhigstellung von Frakturen der Unterarm-, Unterschenkel-, Hand- bzw. Fußknochen.

Sie sind einfach anzulegen, vielfach einsetzbar und gut zu reinigen. Die Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig. Klettverschlüsse sorgen für den sicheren Sitz der Vakuumschiene.

Vakuumschienen-Set AS 190 MS
bestehend aus:

- Unterarmschiene AS 100 MS
- Armschiene AS 120 MS
- Beinschiene AS 140 MS
- Handabsaugpumpe G 701 MS
- Reparatur-Set AS 170 MS
- Transporttasche AS 180 MS

Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden.



Zusätzlich erhältlich:

Beinschiene AS 150 MS
mit Fußstütze

Handabsaugpumpe G 701 F
mit Fußsteg



IMMOBILISATION

Eigenschaft/Ausführung	Vorteil
Kammersystem für ausgezeichnete Stützung.	Sorgt für bestmögliche Immobilisation. Schnell anzulegen.
Die zwei großen Beinschienen können auch für Kinder unter Verwendung der Verlängerungen benutzt werden.	Immobilisation von Kindern. Löst in vielen Ambulanzfahrzeugen ein Problem.
Dauerhafte und stabile Stützung des Patienten.	Sichere und einfache immobilisation.
Robustes Material hält das Vakuum über 24 Stunden.	Hält länger, sicher und verlässlich.
Hygienisches Design, leicht zu reinigen.	Sicherer, einfacher, reduziert den Reinigungsaufwand.
Röntgenstrahlendurchlässig.	Direkte Verwendung zum CRT.
Kann in Verbindung mit fast allen handelsüblichen Krankentragen verwendet werden.	Universell einsetzbar.
Leicht benutzbares Reparatur-Set.	Kein Einsenden zur Reparatur. Schnell reparabel.
Austauschbares Ventil.	Immer wieder schnell einsatzbereit.
Multi-Ventil.	Verwendung anderer Absaugpumpen möglich.
Ventil mit Rückschlagventil und zusätzlichem Stöpsel.	Müheloses Benutzen, selbsterklärend.
Aufgeschweißtes Klettband.	Besser verteilte Zugkräfte, weniger Verschleiß, längere Haltbarkeit.
Mehr Klettband.	Mehr Anwendungsmöglichkeiten, bessere Immobilisation.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Vakuumschiene AS 100 MS	530 mm	350 mm	40 mm	0,4 kg
Vakuumschiene AS 120 MS	735 mm	610 mm	40 mm	1,0 kg
Vakuumschiene AS 140 MS	980 mm	610 mm	40 mm	1,3 kg
Vakuumschiene AS 150 MS	1360 mm	730 mm	40 mm	1,5 kg



All-in-One Vakuummatratze G 801

Ausstattungsmerkmale:

- 4-fach Begurtung wie abgebildet
- 2-fach Kopffixiergurte
- Seitliche Griffaussparungen
- Robustes Ventil
- EN 1865 konform
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set



Bei Verwendung als permanente Tragenauflage wird die Norm EN 1789/1865 erfüllt, die Vakuummatratze ist entsprechend Crash-getestet.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
All-in-One G 801	2.050 mm	1.150 mm	55 mm	ca. 5,5 kg	250 kg



Korbtrage SPARTAN 2076, teilbar

Diese ganz aus rostfreiem Stahl oder Titan gefertigte Korbtrage ist bis ca. 1.100 kg belastbar. Auf den integrierten Kufen kann sie gut über unebenes Gelände gezogen werden. Die Polyethylen-Wanne ist am mittleren Tragenrahmen sicher befestigt, der obere Tragenrahmen bleibt somit frei und kann von mehreren Helfern an allen Stellen rundherum zum Tragen verwendet werden. Die Helfer müssen also nicht Griffaussparungen suchen und können selbst mit Handschuhen gut zugreifen.

Die Spartan Korbtrage ist leicht zu transportieren, da sie in zwei ineinander passende Hälften zerlegt werden kann.

Durch die leichtgängigen LocSafe Verbindungsstücke ist sie innerhalb von 15 Sekunden einsatzbereit.

Vorgegebene StratLoad Befestigungspunkte für die Abseilspinne sorgen für sicheren Sitz von Karabinerhaken.

Mindestbestellmenge 400 Stk.



Ebene Gleitoberfläche am Boden für bessere Handhabung auf unebenem Gelände




StratLoad™ Befestigungspunkte für eine sichere Anbringung der Abseilspinne




LocSafe™ Verbindungsstücke für eine sichere Verbindung

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Spartan 2076	2.180 mm	620 mm	190 mm	16 kg	1134 kg
Spartan 2076 TI	2.180 mm	620 mm	190 mm	10 kg	1134 kg

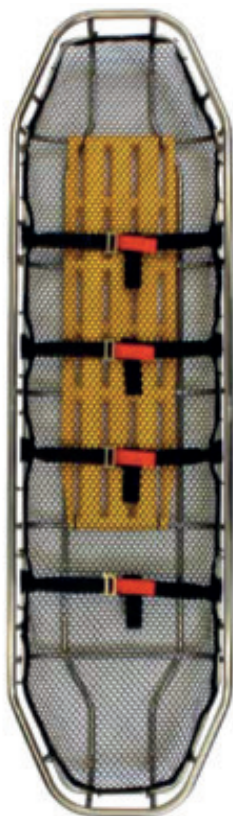

2070 / 2072

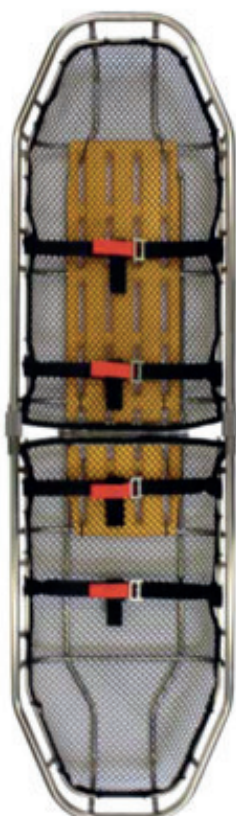

2070 S / 2072 S

Korbtragen Serie 2070

Neben unseren bekannten herkömmlichen Korbtragen zeigen wir hier weitere Modelle mit den verschiedensten Ausstattungsmerkmalen.

Diese Korbtragen bestehen aus einem Stahlrahmen und einer netzartigen Kunststoffbespannung. An der Unterseite sind weitere Streben angebracht, welche zusätzliche Stabilität gewährleisten.

Die Liegefläche ist so geformt, dass sie dem Patienten Schutz, Sicherheit und Komfort während des Bergungsvorganges bietet. Die Korbtragen zeichnen sich besonders durch ihre teils sehr hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht aus.

Für den adipösen Patiententransport empfehlen wir unsere Spezialkorbtrage Modell 2070-32 mit der extrabreiten Liegefläche von 81 cm.

Bei der Modellreihe 2070 besteht der Rahmen aus rostfreiem Stahl. Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von 2.5 cm. Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt. Die gelbe Rückenauflage bietet Komfort und Stabilität für den Patienten. Speziell angebrachte StratLoad™ Befestigungspunkte am Hauptrahmen der Korbtrage dienen zur schnellen Befestigung der Abseilspinne. Zum Lieferumfang gehören vier Patientenhaltegurte.


2070	Standardmodell, leicht abgeschrägten Ecken
2070 T	Zusätzlich abgeschrägtes Beinteil
2070 S	In der Mitte teilbar, leicht abgeschrägte Ecken
2070 ST	In der Mitte teilbar, abgeschrägtes Beinteil



In der Mitte teilbar für eine platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport zum Einsatzort




LocSafe™ Verbindungsstücke für eine sichere Verbindung von teilbaren Korbtragen

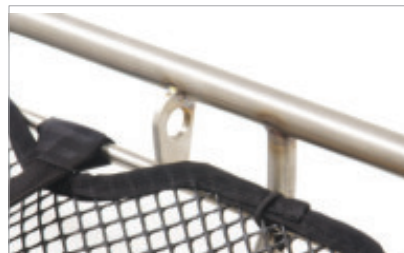

StratLoad™ Befestigungspunkte für eine sichere Anbringung der Abseilspinne



2070 T / 2072 T

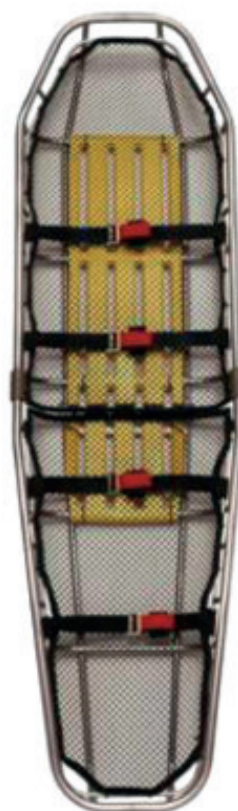

2070 ST / 2072 ST

Korbtragen Serie 2072

Die Korbtragen 2072 entsprechen der Serie 2070, sind jedoch aus Titan hergestellt und daher besonders leicht und dennoch extrem stabil. Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von 2.54 cm. An der Unterseite sind zur Stabilität weitere Streben angebracht. Zum Lieferumfang gehören vier Haltegurte.

2072	Standardbreite, alle Ecken leicht abgeschrägt
2072 T	Standardbreite, abgeschrägtes Beinteil
2072 S	in der Mitte teilbar, alle Ecken leicht abgeschrägt
2072 ST	in der Mitte teilbar, abgeschrägtes Beinteil


TITAN

TECHNISCHE DATEN

	Länge x Breite x Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2070	2 110 x 580 x 180 mm	14 kg	1 134 kg
2070 S	2 110 x 580 x 180 mm	16,3 kg	1 134 kg
2070 T	2 110 x 580 x 180 mm	14 kg	1 134 kg
2070 ST	2 110 x 580 x 180 mm	16,3 kg	1 134 kg
2072	2 110 x 580 x 180 mm	6 kg	1 134 kg
2072 S	2 110 x 580 x 180 mm	7 kg	1 134 kg
2072 T	2 110 x 580 x 180 mm	6 kg	1 134 kg
2072 ST	2 110 x 580 x 180 mm	7 kg	1 134 kg

BERGEN / RETTEN

PORTER 11-2224 (Tragen-Muli)

Der Porter ist ausgestattet mit 2 „never flat“ Reifen, er ist schnell und einfach zu beladen, hat achtfach verstellbare Führungsbügel.

Serienmäßige Ausstattung Porter:

Universelles Design, passend für die meisten starren Krankentragen. 8-fach verstellbare Führungsbügel. Zwei-Rad-Konstruktion, bestens geeignet für längere Transportwege.

Befestigung der Krankentrage mittels zwei Gurten mit gummiummantelten 25 mm Haken und Schnellspannern. Sicherungsstifte beidseitig zur Führungsriff-Arretierung. Zur platzsparenden Unterbringung ist das Gerät schnell demontierbar.



Auf Wunsch kann das Gestell in Hi-Viz Gelb oder Coyote Braun gegen Aufpreis geliefert werden.



Korbtrage gehört nicht zum Lieferumfang



Mit kräftigen Spanngurten wird die Korbtrage auf dem PORTER gesichert.

Aufbewahrungstasche 11-2200

Eine als Zubehör lieferbare Aufbewahrungstasche schützt den PORTER oder den MULE II bei Nichtgebrauch.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Porter einsatzbereit	2 450 mm	700 mm	660 mm	19 kg	227 kg
Porter zusammengelegt	930 mm	700 mm	470 mm	19 kg	227 kg



MULE II ist ausgestattet mit Geländereifen, 8-fach verstellbaren Führungsbügeln und leicht bedienbarer Tragen-Halterung, somit leichter zu manövrieren, weniger Kräfteverschleiß und Verletzungsgefahr.

Serienmäßige Ausstattung MULE II:

Universelles Design, passend für die meisten starren Krankentragen. 8-fach verstellbare Führungsbügel. Ein-Rad-Konstruktion, bestens geeignet für enge Wege, leicht manövrierbar, einsetzbar in unwegsamem Gelände, auf sumpfigem Boden, bei Spurrillen, über Wurzeln, felsigen oder auch verschneiten Untergrund. Der große Geländereifen sorgt für bessere Spurtreue und absorbiert Stöße. Somit wird für komfortablen Patiententransport gesorgt. Befestigung der Krankentrage mittels 2 Gurten mit gummiummantelten Haken und Schnellspannern. Sicherungsstifte beidseitig zur Führungsriff-Arretierung. Zur platzsparenden Unterbringung ist das Gerät schnell demontierbar.

Zusätzliche Funktionen MULE II:

Zusammengelegt nicht viel größer als das Rad selbst. Auch geeignet für behelfsmäßig zusammengebaute Tragen aus Brettern oder Baumstämmen.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	zusammen- gelegt	Gewicht	Belastbarkeit max.
Mule II mit Griffen	2 440 mm	700 mm	470 mm	900 (L) x 700 (B) x 510 (H) mm	24 kg	227 kg
Mule II ohne Griffen	830 mm	650 mm	470 mm		16,5 kg	227 kg

BERGEN / RETTEN**Abseilspinne 15-0108**

Mit vier Karabinerhaken, geeignet für alle Korbtragen der Modellreihen 2070 bis 2074.

Wir liefern die Abseilspinne 15-0108 mit fest eingenähten Ösen, in denen die Karabinerhaken befestigt werden.

**Tragegriffe 15-0240**


Die Tragegriffe für Korbtragen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Sie werden einfach an Kopf- und Fußende an die Korbtrage angesteckt und erleichtern das Tragen erheblich.

**Schulter-Tragebegurtung
15-0145**

Die Schulter-Tragebegurtung ist individuell auf die Körpergröße einstellbar und kann bei Schleifkorbtragen am Rahmen angebracht werden. Die Begurtung sorgt für bessere Gewichtsverteilung zwischen Oberkörper und Armen und somit für ergonomischeres Tragen.

**Schulter-Tragebegurtung
15-0146**

Dieses Modell erleichtert das Tragen von teilbaren Korbtragen zum Einsatzort durch unwegsames Gelände.

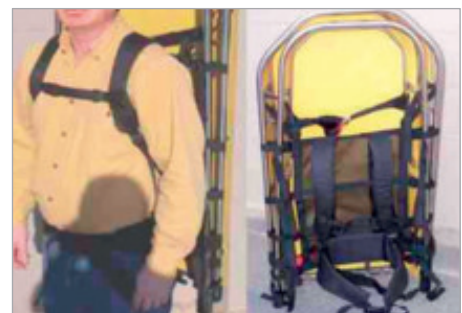

RETTUNGSTRAGE 2074



Die Rettungstrage 2074 eignet sich für waagerechte und senkrechte Evakuierungen. Sie ist leicht und platzsparend zusammenrollbar. Durch das flexible Design wird der Patient sozusagen eingewickelt und fühlt sich sicher und gut behütet. Schultern, Arme und Seiten des Körpers liegen in einer schützenden Hülle während der Rettungsaktion.

Durch ihre Kompaktheit lässt sich die Rettungstrage besonders gut bei engsten Raumverhältnissen einsetzen. Äußerst strapazierfähige Materialien, eine ausreichende Anzahl von Quergurten, gepolsterte Hosenträger- und Fußgurte fixieren den Patienten sicher und komfortabel. Die rundum außen angebrachten Trageschlaufen ermöglichen den Transport durch mehrere Helfer und dienen als Anschlagpunkte für die Abseilspinne (Modell 15-0108). Eine Schutzhülle gehört zum Lieferumfang.



Schutzhülle
gehört zum Lieferumfang



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Gewicht	Belastbarkeit max. horizontal	Belastbarkeit max. vertikal
Rettungstrage 2074	2.020 mm	840 mm	8 kg	350 kg	250 kg

RETTUNGSLEITERN



Rettungsleitern

FERNO Rettungsleitern sind für professionelle Spezial-Einsätze bestimmt und werden in Handarbeit hergestellt.


Die verschiedenen Modelle sind besonders auf die entsprechenden Anforderungen der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten gestaltet.

Hierbei wurde besonderer Wert gelegt auf:

- Leichtigkeit
- Geräuschlosigkeit
- Stabilität
- Langlebigkeit

Jede Leiter hat spezifische Belastungswerte die nicht überschritten werden sollten.

Fordern Sie bei Interesse ausführliches Informationsmaterial an.

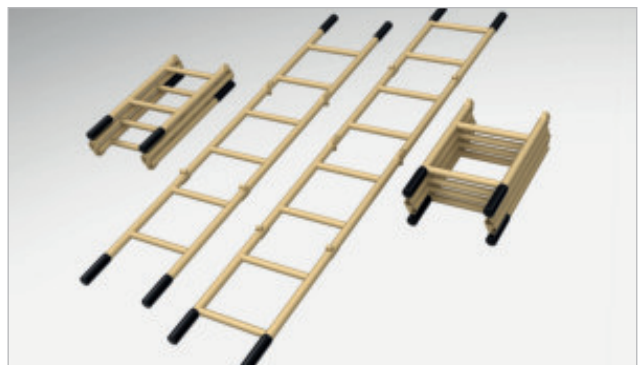

Tragenlagerungen

FERNO Tragenlagerung für Lochschienen sind universell einsetzbar.

Fordern Sie bei Interesse unser ausführliches Informationsmaterial an.



Tragenlagerungsböcke

**Schnell einsatzbereit und kompakt zusammenklappbar.
Geeignet für verschiedene Tragen, mit optionalen Infusions-
flaschenhalter und Ablageplatte.**

Bis 227 kg Belastbarkeit.

**Fordern Sie bei Interesse unser
ausführliches Informationsmaterial an.**



FÜR PROFIS VON PROFIS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 TACTICAL PRODUCTS 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

FERNO®
XTRIC8
RETTUNGSTRAGE



Sie wollen mehr
darüber erfahren?

Fordern Sie unsere
Produktinformation an

