



FAST



TRAGSTÜHLE

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 TREPPENTRANSPORT FAST 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



225 kg





FAST

ohne Raupe

FAST-F

mit fester EZ Glide Raupe

FAST-R

mit abnehmbarer EZ Glide Raupe

FAST-RPT

mit abnehmbarem
elektrischem PowerTraxx System



FAST-RPT

FAST-RPT (mit abnehmbarem
elektrischem PowerTraxx System)



TREPPENTRANSPORT LEICHT GEMACHT

FAST TRAGSTÜHLE

Die FAST Trag- und Treppenstühle sind für den professionellen Einsatz konzipiert und dienen dem Transport eines sitzenden Patienten.

Die FAST Trag- und Treppenstühle können ebenerdig gerollt und treppab und treppauf getragen werden. Die Versionen mit Raupensystem FAST-F und FAST-R können Treppen hinunter und FAST-RPT kann Treppen hinauf und hinunter gefahren werden, ohne dass die Anwender die Stühle tragen müssen.

Die Tragstühle sind mit vier Traggriffen, einer klappbaren Fußstütze sowie zwei Schwenkrollen vorne und zwei Laufrollen hinten, mit Feststellbremse, ausgestattet.

Zur platzsparenden Unterbringung sind die Tragstühle klappbar und können im geklappten Zustand in der optional erhältlichen Wandhalterung FAST-WH sicher arretiert werden. Die Wandhalterung ist nach EN 1789 mit den FAST Tragstühlen crash-gestestet.

Die FAST Trag- und Treppenstühle sind in vier verschiedenen Versionen erhältlich:



FAST-R
(mit abnehmbarer
EZ Glide Raupe)

FAST (ohne Raupe)

FAST-F (mit fester EZ Glide Raupe)

TREPPENTRANSPORT

Klappbare Fußstütze



Kopfstütze



Ergonomische, breite Klappgriffe

Ausstattungsmerkmale aller Modelle der FAST Trag- und Treppenstuhl Reihe

- Die Aluminiumkonstruktion eignet sich für Patienten bis zu 225 kg Gewicht
- Zwei 125 mm vordere Schwenkrollen und zwei 150 mm große starre Laufrollen mit Feststellbremse hinten
- Gute Manövrierfähigkeit selbst bei engen Raumverhältnissen oder Fluren
- Hinterer Führungsbügel ausziehbar und in 4 Positionen arretierbar von 1000 bis 1580 mm
- Vordere Traggriffe in 5 Positionen feststellbar bis maximal 340 mm
- Leicht zu reinigende Rücken- und Sitzfläche
- Kopfstütze, klappbare Fußstütze und drei Patientengurte serienmäßig
- 4-Punkt Hosenträgerbegurtung, klappbare Armlehnen, Zubehörnetz und Wandhalterung FAST-WH als Zubehör erhältlich
- Raupensysteme EZ-Glide und PowerTraxx sind als Nachrüstsatz erhältlich und können untereinander getauscht werden
- Alle Modelle der FAST Trag- und Treppenstuhl Reihe entsprechen dem internationalen Standard EN 1865-4 2012

KOMPAKT ZUSAMMENKLAPPBAR




TECHNISCHE DATEN

FAST TRAGSTÜHLE									
	Höhe min.	Breite gesamt	Breite Sitz	Tiefe offen	geklappt Länge x Breite x Tiefe	Gewicht o. Raupe	Gewicht m. Raupe	Belastbarkeit max.	
FAST	1 000 mm	516 mm	415 mm	695 mm	1 000 x 516 x 200 mm	11,2 kg		225 kg	
FAST-F	1 000 mm	516 mm	415 mm	695 mm	1 000 x 516 x 200 mm	15 kg		225 kg	
FAST-R	1 000 mm	516 mm	415 mm	695 mm	1 000 x 516 x 215 mm	11,2 kg	15 kg	225 kg	
FAST-RPT	1 000 mm	516 mm	415 mm	695 mm	1 000 x 516 x 215 mm	11,2 kg	25 kg	225 kg	


Klappgriff KIT 65-4158-001

Breite Ausführung, hinten rechts/links für alle FAST Tragstühle auch nachträglich erhältlich.

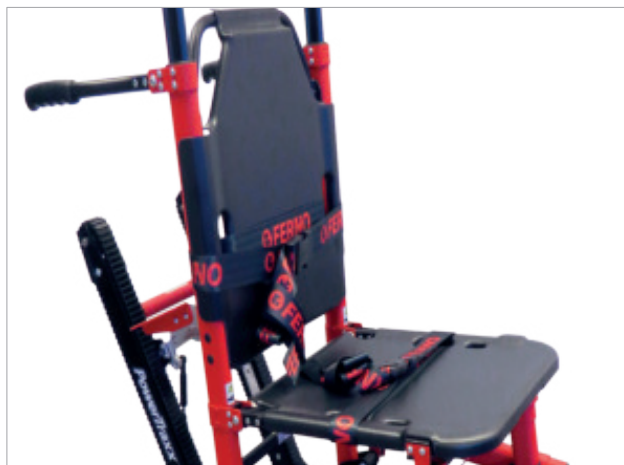

Sitzfläche und Rückenlehne

Die feste, ansteckbare Sitzfläche und Rückenlehne ist auch nachträglich für alle FAST Tragstuhl Modelle erhältlich.



TREPPENTRANSPORT

Optionales Zubehör

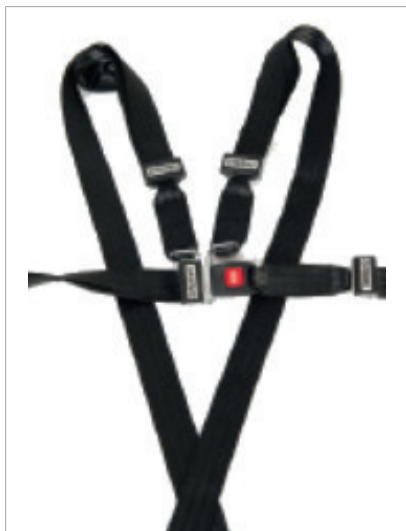

FAST 417
4-Punkt Hosenträgerbegurtung



FAST-AL
Klappbare Armlehnen
für erhöhten Patientenkomfort.



FAST-NZ
Zubehörnetz
z. B. für eine Sauerstoffflasche

Staubschutzabdeckung FAST 385

Kann in Verbindung mit der Wandhalterung verwendet werden und schützt den FAST Stuhl vor unnötiger Verschmutzung.



FAST-WH Wandhalterung

Die Wandhalterung dient zur sicheren Fixierung der FAST Chair Tragstuhlmodelle FAST, FAST-F, FAST-R und FAST-RPT. Die Halterung wird an der Wand des Fahrzeugs oder an der Wand in einem Gebäude angebracht und sichert den zusammengeklappten Tragstuhl. Die Wandhalterung ist nach EN 1789 mit den FAST Chair Tragstühlen crash-gestestet.



EZ Glide Raupensystem

Als Nachrüstsatz ist die mechanische EZ Glide Raupe für die Tragstühle lieferbar, die ohne Raupe angeschafft wurden.

PowerTraxx

WELTWEIT IM EINSATZ




PowerTraxx FAST
elektrisches Raupensystem

Als Nachrüstsatz ist das elektrische PowerTraxx Raupensystem für die Tragstühle lieferbar, die ohne Raupe angeschafft wurden oder als Austausch des EZ Glide Raupensystems.

Elektrisch können bis zu 225 kg Gewicht treppab UND treppauf befördert werden ohne zu heben oder zu tragen.

Mit einer Akkuladung können bis zu 800 Stufen überwunden werden.

Das Raupensystem wird über intuitiv bedienbare Tasten gesteuert und kontrolliert.

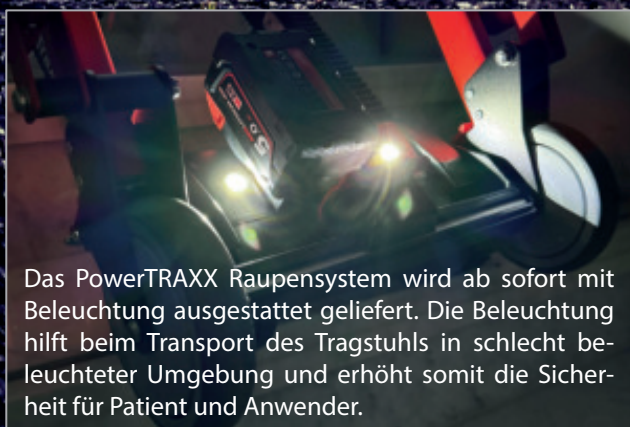

Das PowerTRAXX Raupensystem wird ab sofort mit Beleuchtung ausgestattet geliefert. Die Beleuchtung hilft beim Transport des Tragstuhls in schlecht beleuchteter Umgebung und erhöht somit die Sicherheit für Patient und Anwender.

**SPITZHAUSTREPPE - 220 METER LANG
80 HÖHENMETER - 397 TREPPENSTUFEN
70 KG - EIN AKKU**

Schauen Sie sich das Video vom PowerTraxx System im Einsatz an (hier am ALS 328 PTX) und lassen Sie sich überzeugen.





FAST-W

RÄDER - KIT

Für alle FAST Tragstühle, bis auf den FAST-F mit festverbauter Raupe, ist ab sofort das FAST-W Räder-Kit als Zubehör erhältlich.

Das abnehmbare Räder-Kit ist einfach an den gleichen Punkten wie das PowerTRAXX Raupensystem am Tragstuhl zu befestigen und zu sichern und ermöglicht ein leichtes und sicheres Fahren des Tragstuhls in schwierigem Gelände, z. B. über Rasen, Sand, Matsch und Schlamm, am Strand, auf der Festwiese, und überall dort, wo grobes Gelände eine Herausforderung darstellt.

Technische Daten

FAST-W	
Rad	530 x 50 mm
Gewicht	8 kg
Belastbarkeit max.	250 kg



Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 TREPPENTRANSPORT FAST 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

Weitere Tragstühle für den PATIENTENTRANSPORT



TRAGSTUHL 46 E

TRAGSTÜHLE 40 / 40 G 42, 48



**Fordern Sie weitere
Informationen an!**

