



X^T Board



IMMOBILISATION

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 XT Board 20260521
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.




XT

Board

XT Board

Das XT Board aus Composite-Material ist äußerst leicht und dennoch stabil. In weniger als einer halben Minute angelegt, stellt es bisherige Hilfsmittel in den Schatten und ist so hervorragend geeignet für die Stabilisierung der Wirbelsäule und anschließende Bergung von verletzten Personen aus engsten Räumlichkeiten, z.B. aus Fahrzeugen.

Das XT-Stabilisierungs-Board dient der schnellen Extrikation und Ruhigstellung der Wirbelsäule bei der Rettung aus engen Räumlichkeiten und kritischen Situationen. Es ist für ein breites Spektrum von Patienten und Anwendungen einsetzbar, z.B. Kinder, adipöse Patienten oder auch schwangere Frauen.

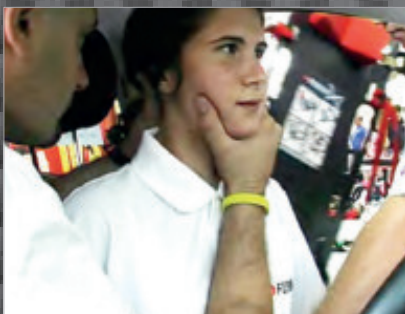

0 Sek.

XT zur Immobilisierung der Wirbelsäule hinter den Patienten schieben

5 Sek.

Kopfgurt anlegen

10 Sek.

Patienten mit den farbig codierten Gurten sichern

15 Sek.

Patienten aus dem Fahrzeug heben



18 Sek.

Patienten vom Unfallort abtransportieren

- Schnelle Extrikation in weniger als 20 Sekunden
- Vier farblich codierte Gurtschlösser, Kopffixierung und glatte Oberfläche sorgen für korrektes Anlegen
- Leichtes Fassen und Heben durch 4 Trageschlaufen
- 100% röntgenstrahlendurchlässig
- Leicht zu reinigen und desinfizieren

Lieferumfang: XT Board, QHI Kopffixierung mit Stirn- und Kinngurt, Aufbewahrungstasche



Kopffixierung QHI

Das QHI aus Polyurethan ist leicht zu reinigen. Mit den geringen Abmessungen 220x180x60 mm ist das QHI platzsparend unterzubringen, es wiegt nur 370 g.

Das ergonomische Design in V-Form sorgt in Verbindung mit der zum Lieferumfang gehörenden Kopfbegurtung für sichere Stabilisierung beim Transport des Verletzten.

Auf Wunsch liefern wir als Zubehör einen weiteren Stirn- oder Kinngurt.

TECHNISCHE DATEN

XT Board				
Länge	Breite	Höhe XT Board mit QHI	Gewicht	Max. Belastbarkeit
830 mm	300 mm	60 mm	2 kg	160 kg

XT Board

XT PRO (BODY LIFTING) UND KIT PRO (BODY LIFTING)

für vorhandene XT Boards

Bereits ein vielseitiges Rettungs- und Bergegerät, können neue oder bestehende Benutzer des FERNO XT BOARDS mit dem FERNO XT PRO (BODY LIFTING), dieses innovative System nun auch für die vertikale Rettung / Bergung verwenden.

Als XT PRO (Body Lifting) Board oder durch Erweiterung eines vorhandenen XT BOARDS mit dem KIT PRO (BODY LIFTING) können Sie Patienten auch bei engsten Gegebenheiten vertikal bergen und gleichzeitig vor Wirbelsäulenverletzungen schützen.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist es eine erfolgreiche Kombination für Rettungs- und Bergeteams.



TECHNISCHE DATEN

XT PRO (BODY LIFTING)				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max. Belastbarkeit
830 mm	300 mm	60 mm	3,4 kg	160 kg

Das XT Board ist ein vielseitiges Rettungs- und Bergegerät.

Jetzt können neue oder bestehende Benutzer des FERNO XT BOARDS mit dem FERNO XT PRO (BODY LIFTING), dieses innovative System nun auch für die vertikale Rettung / Bergung verwenden oder mit dem FERNO XT FLOATING, das System auch für die Wasserrettung einsetzen.



XT Board

XT FLOATING BOARD UND KIT FLOATING

für vorhandene XT Boards

Bereits ein vielseitiges Rettungs- und Bergegerät, können neue oder bestehende Benutzer des FERNO XT BOARDS mit dem FERNO XT FLOATING, dieses innovative System nun auch für die Wasserrettung verwenden.

Als XT Floating Board oder durch Erweiterung eines vorhandenen XT BOARDS mit dem KIT FLOATING können Sie das robuste XT BOARD aus Kohlefaser für die Wasserrettung einsetzen und so Patienten bergen, gleichzeitig vor Wirbelsäulenverletzungen schützen und den Kopf des Patienten über Wasser halten. Die Selbstaufrichtfunktion der Schwimmröhren stellt sicher, dass das XT FLOATING System den Patienten immer an der Wasseroberfläche hält.

Durch das Hinzufügen der (3) Schwimmröhren zusammen mit (4) Bedienergurten, (2) Querrückhaltgurten und (1) Längsrückhaltgurt, ist der XT BOARD Nutzer für jeden Wasserrettungseinsatz vorbereitet.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist es eine erfolgreiche Kombination für Rettungsteams.



TECHNISCHE DATEN

XT FLOATING				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max. Belastbarkeit
1 200 mm	350 mm	110 mm	3,3 kg	160 kg

Das XT Board ist ein vielseitiges Rettungs- und Bergegerät.

Jetzt können neue oder bestehende Benutzer des FERNO XT BOARDS mit dem FERNO XT PRO (BODY LIFTING), dieses innovative System nun auch für die vertikale Rettung / Bergung verwenden oder mit dem FERNO XT FLOATING, das System auch für die Wasserrettung einsetzen.



Schaufeltrage 65 EXL

**Das richtige Werkzeug.
Darauf kommt es an!**



Die Schaufeltrage dient zur schonenden Aufnahme und Umlagerung von Patienten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Unnötige Bewegungen des Patienten werden vermieden, denn mit der Schaufeltrage können Sie den Patienten in der Stellung aufnehmen, in der Sie ihn vorfinden.

Sie wollen mehr erfahren?

Fordern Sie unseren ausführlichen
Prospekt zur Schaufeltrage 65 EXL an.



Doppelsicherheitsverschluss

der beim Schließen und Öffnen nicht klemmt

Muldenförmiger Kopfbereich

zur sachgerechten Immobilisation des Kopfes und der Halswirbelsäule

Oberfläche

ist leicht zu reinigen und nimmt keine Flüssigkeiten auf

Schwarz, rot, gelb, olivgrün

in verschiedenen Farben lieferbar



FERNO SCHAUFELTRAGEN

65 EXL

Die Schaufeltrage dient zur schonenden Aufnahme und Umlagerung von Patienten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Unnötige Bewegungen des Patienten werden vermieden, denn mit der Schaufeltrage können Sie den Patienten in der Stellung aufnehmen, in der Sie ihn vorfinden. Modell 65 EXL ist äußerst sicher und stabil, von geringem Gewicht, einfach zu reinigen und gut zu bedienen.

Zum Lieferumfang gehören drei Haltegurte mit Drucktastenschloss und Aufbewahrungstasche. Der Doppelsicherheitsverschluss lässt sich leicht und ohne zu verklemmen öffnen und schließen. Somit ist die 65 EXL in der Mitte teilbar, damit sie von der Seite unter den Patienten geschoben werden kann, ohne diesen hoch- oder anheben zu müssen.

Die Längenverstellung erfolgt über seitlich angebrachte Drehschnäpper in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse.

Die Schaufeltrage ist platzsparend zusammenlegbar.



Belastbarkeit

227 kg

auch mit

Verbreiterungs-Kit-TSL

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 XT Board 20260521
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

IMMOBILISATION MIT VAKUUMPRODUKTEN

EasyFix PLUS

Vakuummatratze

G 511



Fordern Sie weitere
Informationen an!

